



medi

ortopedické pomůcky medi ortézy a bandáže

rok vydání: 2016

medi. I feel better.





“I feel better”

Lidé po celém světě by si na začátku každého nového dne měli moci říct: „Cítím se lépe!“

Vysoká očekávání i nároky se pojí s vysokou úrovní motivace a odhodlání. medi na tyto výzvy odpovídá vývojem výrobků a technologií, které zlepšují kvalitu života.



Máme přímé spojení

ke komunikaci, ke spolupráci, k vzájemné podpoře. Servisní tým medi tento požadavek bere velmi vážně. Proto nejenže posíláme své nejlépe kvalifikované konzultanty k vám do ordinace, ale nabízíme také nejmodernější logistický a komunikační systém. Vše v pravý čas: poradenství, služby, objednávky i dodávky. Vždy jsme vám k službám. Jsme váš exportní a servisní tým medi.

Horká linka

Poradenství, objednávky, řešení problémů

Německé ústředí:

T +49 921 912-0

F +49 921 912-783

email: export@medi.de

pobočky medi:

kontaktní informace naleznete na zadní obálce

www.medi.de/en



10

Záda

- 12 Lumbamed® plus
- 13 Lumbamed® plus Thermo pad
- 14 Lumbamed® basic
- 15 Lumbamed® active
- 16 Lumbamed® facet
- 17 Lumbamed® stabil
- 18 Lumbamed® disc
- 19 Spinomed® II
- 20 Spinomed®
- 21 Spinomed® active
- 22 Spinomed® active men
- 23 medi 3 C
- 24 medi 4C flex
- 25 medi 4C



26

Rameno / Loket

- 28 Omomed®
- 29 medi SLK 90
- 30 medi Easy sling
- 31 medi Armschlinge
- 32 medi Arm fix
- 33 medi Humeral fracture brace
- 34 medi Shoulder sling
- 35 medi SAS® comfort
- 36 medi SAS® 15
- 37 medi SAS® 45
- 38 medi SAS® multi
- 39 medi SAK
- 40 medi Elbow support
- 41 Epicomed
- 42 medi elbow strap
- 43 medi Epibrace
- 44 medi Epico ROMs
- 45 medi ESS



46

Ruka

- 48 Manumed active
- 49 medi wrist support
- 50 Manumed
- 51 Manumed tri
- 52 Manumed T
- 53 medi CTS
- 54 medi thumb support
- 55 Rhizomed® soft
- 56 Rhizomed®



58

Kyčel

- 60 medi orthocox
- 61 medi Hip one



62

Koleno

- 64 medi patella tendon support
- 65 medi elastic knee support
- 66 Genumedi®
- 67 Genumedi® plus
- 68 Genumedi® PT
- 70 Genumedi® pro
- 71 Stabimed® pro
- 72 Stabimed®

- 73 Collamed® / Collamed® long
- 74 medi PT control
- 75 Collamed® OA
- 76 M.4® AGR
- 78 M.4s® / M.4s® comfort
- 80 M.4 X-lock® 81 M.3s OA
- 82 M.4®s OA
- 84 medi Classic
- 85 medi Jeans
- 86 medi PTS
- 87 medi ROMmedi ROM cool



88

Hlezno

- 90 medi elastic ankle support
- 91 Achimed
- 92 Levamed
- 93 Levamed active
- 94 Levamed stabili-tri
- 95 M.step®
- 96 medi ROM Walker
- 97 medi Walker boot



98

Kidz

- 100 medi Collar soft Kidz
- 100 medi Clavicle support Kidz
- 101 medi Armschlinge Kidz
- 101 medi Shoulder sling Kidz
- 102 medi Epico ROMs Kidz
- 102 Manumed Kidz
- 103 medi Classic Kidz
- 103 medi ROM Kidz
- 104 M.Step® Kidz
- 104 medi Walker boot Kidz
- 105 měkké bandáže medi

Certifikáty kvality

Společnost medi jako výrobce zdravotnických prostředků věnuje velkou pozornost kvalitě. Certifikace výrobků a systémů dokládají naplnění všech zákonných požadavků.

Značka CE

Naše zdravotnické výrobky značky medi splňují všechny požadavky evropské směrnice 93 / 42 / EHS o zdravotnických prostředcích a německého zákona o zdravotnických prostředcích. V souladu s předpisy naše výrobky podstupují posouzení shody a je jim udělena značka CE. Značka CE slouží jako určitý „pas pro průmyslové výrobky“ a zaručuje volný obchod v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).



Značka kvality Důvěra k textiliím

Všechny ortopedické ortézy a bandáže jsou pravidelně kontrolovány na obsah toxických látek potenciálně škodlivých lidskému zdraví a hodnoceny podle přísných norem nezávislými zkušebními středisky. Udělení certifikátu Öko-Tex Standard 100 zaručuje, že kvalita byla pro ochranu vašeho zdraví ověřena.



DIN EN ISO 9001: 2000 / DIN EN 13485

Společnost medi používá systém managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001: 2000 a DIN EN 13485. Náš statut ISO 9000 našim zákazníkům prokazujeme příslušným certifikátem již od roku 1996. Tak dlouho již společnost medi využívá příležitostí, které tato norma nabízí, k trvalému zlepšování výrobků svých obchodních útvarů flebologie, ortotiky, protetiky a nemocničních pomůcek zaváděním bezpečnějších a efektivnějších procesů a postupů. Spokojenost zákazníků je pro nás rozhodujícím měřítkem kvality.



Inovace výrobků: hodnocení založené na důkazech

Materiály, postupy a požadavky na ortopedické ortézy a bandáže se v průběhu času mění. Společnost medi proto provádí dlouhodobé studie založené na důkazech, které jí umožní na trh se zdravotnickými prostředky přinášet inovativní ortopedické výrobky, jako jsou Spinomed a Spinomed active. Na těchto základech společnost medi staví svou nabídku nových a účinných řešení pro pacienty, vytváří nové trhy a stanovuje standardy pro budoucnost.

Více než jen výrobce

medi vyrábí zdravotnické pomůcky pro širokou škálu potřeb a životních situací. Nevidíme sami sebe ale pouze jako výrobce. Právě naopak: vlastními silami zajišťujeme výzkum a vývoj, technologie, výrobu, marketing i prodej – a vždy přitom myslíme na trh, jeho požadavky a proměny, a na vizi společnosti medi.

Náš sortiment zahrnuje především zdravotní kompresivní punčochy pro pacienty s žilními chorobami, lipedémy a lymfedémy, ortézy a bandáže ke konzervativní a pooperační léčbě ortopedických zranění a onemocnění, punčochy k prevenci trombózy, antiembolické punčochy k použití po operacích žil, kompresní prádlo k použití po plastických a kosmetických operacích a řadu léčebných pomůcek.

Tyto výrobky používají a distribuují nemocnice, kliniky, prodejny zdravotnických potřeb, lékaři a terapeuti. Tedy specialisté, kteří nejlépe vědí, které pomůcky ti kteří uživatelé potřebují ke zlepšení kvality života.

Jsme hrdí na to, že naše výrobky se odlišují tím, že jsou zcela bez negativních vedlejších účinků.


Ortopedická divize společnosti medi se i dnes nadále zaměřuje na funkční léčbu v ortopedii a sportovní medicíně. Bandážemi a ortézami pomáháme chránit a obnovovat zdravý celého pohybového aparátu. Vysoce kvalitní a inovativní produkty jsou dodávány v kombinaci s komplexní podporou. Důraz je vždy na pacienta. Proto naše oddělení výzkumu a vývoje také úzce spolupracuje s našimi partnery ve zdravotnictví a oblasti ortopedických technologií. Moderní továrny a důsledně uplatňovaný systém řízení kvality jsou zárukou vysoce kvalitních výrobků.

Od vývoje po terapeutické využití výrobků – jak se říká:

medi. I feel better.



Výlučné přednosti výrobků společnosti medi

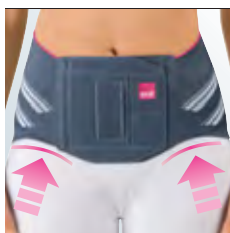


Comfort Zone

medi Comfort Zone

Měkké zóny v citlivých oblastech flexe zajišťují, že bandáž pokožku neotlačí ani se do ní nezařízne, a to ani při celodenním nošení.

› Výsledek: příjemná úleva od bolesti.

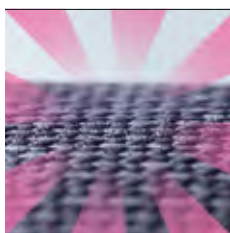


Clima Fresh

medi Clima Fresh

Integrovaná funkce Clima Fresh má antibakteriální účinky a spolehlivě zabraňuje vzniku zápachu. Zabraňuje vniknutí bakterií do úpletu a udržuje ho v hygienickém stavu.

› Výsledek: snižuje se riziko infekcí (např. způsobených mikroorganismy).

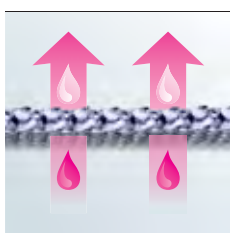

Clima Comfort

medi Clima Comfort


Propracovaný úplet zajišťuje vyvážené mikroklima pokožky. Vlhkost se spolehlivě a rychle odvádí z vnitřního povrchu a odpařuje se na vnějším. Aktivní prodyšná konstrukce materiálu přitom zaručuje přívod nezbytného kyslíku.

› Výsledek: pacienti se nezapotí a nošení pomůcek je jim pohodlné – dokonce i v létě.



medi compression

Značka medi compression označuje vybrané technicky vyspělé výrobky společnosti medi pro oblasti zdravotnictví, životního stylu a sportu. Společnost medi staví na šesti desetiletích tradice ve výzkumu a vývoji kompresivních výrobků – vyráběných v Německu. Technologie výroby zaručuje přesně dávkovanou kompresi těla – s prokazatelně pozitivními účinky na zdraví, výkonnost a celkový zdravotní stav.

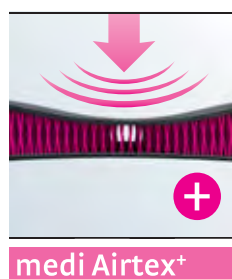

medi Airtex⁺

Elastická distanční látka kombinuje léčebnou kompresi a vlastnosti textilie označované jako **ADAPTIVE** a **PURE**.


ADAPTIVE

Adaptivní termoregulace je založena na inovativním polymeru, jehož vlastnosti se mění v závislosti na teplotě: při nižších teplotách polymer váže ve své struktuře vlhkost, a tělo tak udržuje sušší. Při vyšších teplotách uloženou vlhkost uvolňuje, a tím ochlazuje textilií i pokožku.

PURE

Antibakteriální účinek PURE zaručuje optimální hygienické podmínky do hloubky materiálu – i po dlouhodobém užívání.

› Kombinace léčebné komprese a funkčního materiálu zaručuje lepší komfort nošení.

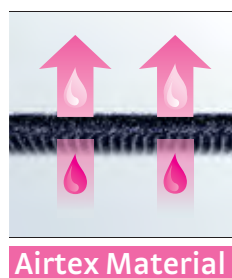

Airtex Material

Inovativní, prodyšný, lehký a kompresivní materiál pro pohodlnou aktivaci propriocepce. Optimalizuje odvod vlhkosti a zajišťuje nejvyšší komfort i v horkém podnebí.





Záda

Lumbamed[®] plus

Bederní pás s masážní pelotou

Indikace

- bolest v dolní části zad (lumbago) způsobená postižením meziobratlových kloubů
- posturální svalová dysbalance v oblasti bederní páteře
- poruchy vazů
- postdiscektomický syndrom
- mírné rozvolnění kloubů v oblasti bederní páteře, např. osteochondróza a spondylóza
- podráždění sakroiliakálního skloubení
- symfyziolýza

Mechanismus účinku

- mírně omezuje lordózu a anterotaci pánve
- pelota Vario-Flex stabilizuje sakroiliakální skloubení a odlehčuje lumbosakrální přechod
- masáž bederního svalstva zlepšuje oběh
- stimulace metabolismu a zmírnění napětí a bolesti svalů díky pelotě Vario-Flex a kompresivnímu úpletu



Kód VZP:

04 - 0078944

Přednosti výrobku



Větrací otvory v pelotě Vario-Flex tento účinek podporují prevencí akumulace tělesného tepla a pocení




Anatomicky pletená podpora zaručuje, že pás dokonale padne, aniž by tlačil – především poblíž anatomicky tvarovaného zapínání




Snadné nasazení díky integrovaným úchytům pro ruce

- stříbrná
- světlá
- černá

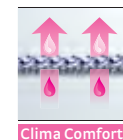


ženy

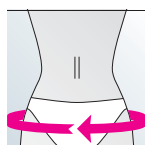

obvod boků – ženy (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140
velikost	I	II	III	IV	V
číslo artiklu	K.210.Δ21	K.210.Δ22	K.210.Δ23	K.210.Δ24	K.210.Δ25

Δ = nahradte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 8 = světlá

muži

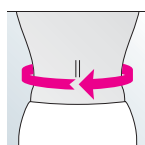

obvod pasu – muži (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130
velikost	I	II	III	IV	V
číslo artiklu	K.210.Δ11	K.210.Δ12	K.210.Δ13	K.210.Δ14	K.210.Δ15

Δ = nahradte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 5 = černá

Lumbamed® plus Termální pelota

Zklidňující teplo pro záda – ideální doplněk pásu Lumbamed plus

Indikace a použití termální peloty

Lumbamed plus Thermo:

- chronická bolest svalů nebo kloubů
- úleva svalového napětí, nespecifická bolest v dolní části zad, bolest v oblasti zad v souvislosti s menstruační a nezápálivé stádium revmatoidní artritidy
- **doporučení:** před použitím se nejprve zeptejte svého lékaře, zda nejsou nějaké důvody, proč termální pelotu Lumbamed plus nepoužívat.

Důležité informace v kostce:

- tepelná pelota se aktivuje prohýbáním malého kovového disku, který je uvnitř
- zahřeje se na 50–55 °C za méně než 30 sekund
- snadné upevnění do pásu suchým zipem
- příjemné teplo v oblasti bederní páteře
- snadné opakované použití – stačí tepelnou pelotu vyvařit v horké vodě (potom nechat vychladnout)



Lumbamed[®] basic

Bederní pás

Indikace

- bolest v dolní části zad (lumbago) způsobená postižením meziobratlových kloubů
- posturální svalová dysbalance v oblasti bederní páteře
- poruchy vazů
- postdiscektomický syndrom
- mírné rozvolnění kloubů v oblasti bederní páteře, např. osteochondróza a spondylóza
- podráždění sakroiliakálního skloubení

Mechanismus účinku

- mírně omezuje lordózu a anterotaci pánve
- výrazná úleva pro bederní páteř a podpora zádových svalů
- čtyři integrované anatomicky tvarované (úhel 350°) pružné dlahy na zádech lze ručně nastavit tak, aby se dokonale přizpůsobily anatomickým tvarům lumbosakrální oblasti
- proprioceptivní kompresivní účinek, který vzniká působením výztuží, stimuluje metabolismus, snižuje svalové napětí a zmírňuje bolest



Kód VZP:

04 - 0063875



Přednosti výrobku



Anatomicky pletená podpora zaručuje, že pás dokonale padne, aniž by tlačil – především poblíž anatomicky tvarovaného zapínání



Snadné nasazení díky integrovaným úchytům pro ruce

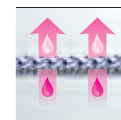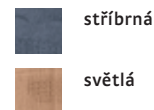

Clima Comfort




Clima Fresh



Comfort Zone


ženy

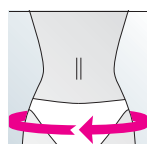

obvod boků – ženy (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140
velikost	I	II	III	IV	V
číslo artiklu	K.200.Δ21	K.200.Δ22	K.200.Δ23	K.200.Δ24	K.200.Δ25

Δ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 8 = světlá (pouze dámská verze Lumbamed basic)

muži

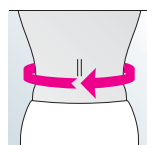

obvod pasu – muži (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130
velikost	I	II	III	IV	V
číslo artiklu	K.200.211	K.200.212	K.200.213	K.200.214	K.200.215

pánská verze k dispozici pouze stříbrná

Lumbamed[®] active

Bederní bandáž

Indikace

- bolest v dolní části zad způsobená tuhostí svalů a svalovou nedostatečností
- podráždění meziobratlových chrupavčitých spojení
- poruchy vazů
- mírné rozvolnění kloubů v oblasti bederní páteře, např. osteochondróza a spondylóza
- postdiscektomický syndrom
- podráždění sakroiliakálního skloubení


Mechanismus účinku

- mírné omezení lordózy a anterotace pánve
- 4 dorzálně integrované tvarovatelné výztuhy stabilizují lumbosakrální oblast
- proprioceptivní komprese stimuluje metabolismus, snižuje svalové napětí a zmírňuje bolest



Kód VZP:

04 - 0063874

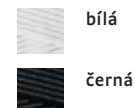


Přednosti výrobku



Prodyšná tkanina

Snadné zapínání díky integrovaným úchytům pro ruce

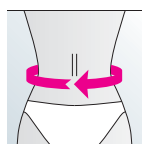

obvod pasu (cm)	70 – 82	82 – 95	95 – 108	108 – 121	121 – 134
velikost	I	II	III	IV	V
číslo artiklu	K.230.Δ01	K.230.Δ02	K.230.Δ03	K.230.Δ04	K.230.Δ05

Δ = nahradte číslem pro barvu: 5 = černá, 7 = bílá

Lumbamed[®] facet

Podpůrná bederní ortéza

Indikace


- osteoartritida meziobratlových kloubů
- protruze / prolaps meziobratlové ploténky
- silná bolest v bederní oblasti ischialgie
- lumbago
- lumbago s přesahem na sakroiliakální skloubení
- chronická bolest v lumbosakrální oblasti
- spondylóza bez posunu obratlů
- spondylolistéza
- svalová dysbalance
- segmentální nestabilita
- stenóza bederního páteřního kanálu

Mechanismus účinku

- cílená úleva pro meziobratlové klouby účinným omezením lordózy
 - přesná regulace intraabdominálního tlaku prostřednictvím dvojitého tříbodového systému popruhů
 - drží pánev ve vzpřímené poloze
- stabilizuje oblast bederní páteře a lumbosakrální přechod



Přednosti výrobku

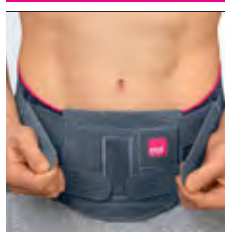


Precizní dvojité tříbodový systém popruhů
umožňuje individuální a plynulé zvyšování tlaku po obvodu břicha



Pletenina a polohovač popruhů
(zejména u dolního popruhu) zcela obemknou pánev a sakroiliakální skloubení (zejména u potíží se sakroiliakálními skloubením)

stříbrná

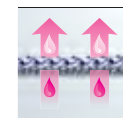


Clima Comfort



Clima Fresh




Comfort Zone

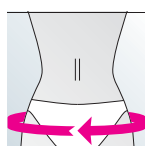

ženy

obvod boků (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140	140 – 155
velikost	1	2	3	4	5	6
číslo artiklu	K.270.201	K.270.202	K.270.203	K.270.204	K.270.205	K.270.206

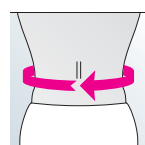

muži

obvod pasu (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130	130 – 150
velikost	1	2	3	4	5	6
číslo artiklu	K.270.201	K.270.202	K.270.203	K.270.204	K.270.205	K.270.206

Lumbamed® stabil

Bederní pás s utahovacími popruhy a volitelnou lumbosakrální pelotou

Indikace

- lumbago
- degenerativní změny meziobratlových kloubů
- osteochondróza
- spondylartróza
- podráždění sakroiliakálních skloubení
- bolest v dolní části zad s ischias (degenerativního původu)
- spondylóza bez posunu obratle
- mírná spondylolýza, spondylolistéza
- protruze nebo prolaps meziobratlové ploténky


Mechanismus účinku

- 4 anatomicky předtvarované dlahy na zádech s možností ručního nastavení stabilizují oblast bederní páteře
- účinné utahovací popruhy podporují korekci polohy páteře individuálně seřiditelnou kompresí a podporou břišní dutiny
- úpony popruhů na zádech účinně zplošťují lordózu (eliminuje se tím účinek konfigurace s centrálním popruhem na zádech, která lordózu prohlubuje)
- volitelná lumbosakrální pelota masáží aktivuje záďové svaly




černá

Přednosti výrobku

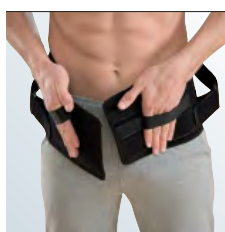

Snadné zapínání díky integrovaným úchytům pro ruce

Výběr ze dvou délek záďové části, 26 a 32 cm, zajišťuje optimální péči pro různé tělesné velikosti

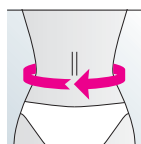

obvod pasu (cm)	70 – 82	82 – 95	95 – 108	108 – 121	121 – 134	134 – 149
velikost	I	II	III	IV	V	VI
číslo artiklu	K.240.5□1	K.240.5□2	K.240.5□3	K.240.5□4	K.240.5□5	K.240.5□6

□ = 0 = bez peloty 26 cm; 1 = bez peloty 32 cm; 2 = s pelotou 26 cm; 3 = s pelotou 32 cm

Lumbamed® disc

Bederní pás s nastavitelným stabilizačním systémem

Indikace

- lumbago
- degenerativní změny meziobratlových kloubů
- osteochondróza
- spondylartróza
- podráždění sakroiliakálních skloubení
- bolest v dolní části zad s ischias (degenerativního původu)
- spondylóza bez posunu obratle
- mírná spondylolýza, spondylolistéza
- protruze / prolaps meziobratlové ploténky

Mechanismus účinku

- odlehčuje tlak na postižené páteřní segmenty snížením svalového napětí
- zplošťuje bederní lordózu (přemostění bederní lordózy)
- podporuje břišní oblast (aktivuje břišní svaly)
- snižuje anterotaci pánve
- díky modulární konstrukci (zádová pelota a výměnné stabilizační výztuhy se dvěma různými stupni tuhosti) lze stabilitu podpory upravovat / snižovat podle postupu rekonvalescence. Nezbytná aktivace svalstva trupu zabraňuje ztrátě svalové hmoty



Kód VZP:

04 - 0093658


Přednosti výrobku



Anatomicky pletená podpora zaručuje, že pás dokonale padne, aniž by tlačil – především poblíž anatomicky tvarovaného zapínání

Snadné nasazení díky integrovaným úchytům pro ruce

stříbrná

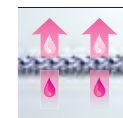


Clima Comfort



Clima Fresh




Comfort Zone

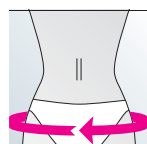

ženy

obvod boků – ženy (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140
velikost	I	II	III	IV	V
číslo artiklu	K.220.221	K.220.222	K.220.223	K.220.224	K.220.225

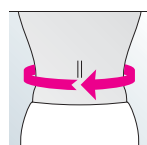

muži

obvod pasu – muži (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130	130 – 146
velikost	I	II	III	IV	V	VI
číslo artiklu	K.220.211	K.220.212	K.220.213	K.220.214	K.220.215	K.220.216

Spinomed® II

Zádová ortéza k extenzi obratlů při osteoporóze a k posílení svalů tělesného jádra

Indikace

- osteoporotický kolaps kostí v oblasti hrudní a bederní páteře
- juvenilní Scheuermannova nemoc
- hyperkyfóza s chronickou bolestí zad

Mechanismus účinku

- systém popruhů a opěry zad aktivuje spuštěním biologické zpětné vazby (biofeedbacku)
- redukce kyfózy v důsledku osteoporózy
- zvýšení mobility posílením svalů
- snížení bolesti


Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném individuálním nasazení a nastavení.




stříbrná

Přednosti výrobku

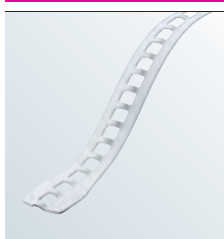


Zádová ortéza je tvarovatelná za studena

Studie

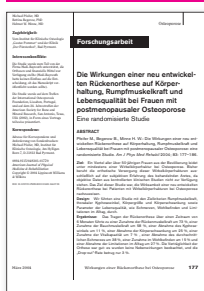

Účinek zádové ortézy Spinomed potvrdily randomizované studie. Kopie jsou k dispozici na vyžádání (číslo artiklu 99E22)

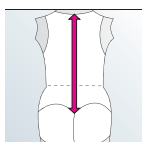

délka zad cm	až 43	44 – 49	50 – 55	56 – 61
velikost	XS	S	M	L
číslo artiklu	5.669.011	5.669.012	5.669.013	5.669.014

Spinomed®

Zádová ortéza k extenzi obratlů při osteoporóze a k posílení svalů tělesného jádra

Indikace

- osteoporotický kolaps kostí v oblasti hrudní a bederní páteře
- juvenilní Scheuermannova nemoc
- hyperkyfóza s chronickou bolestí zad

Mechanismus účinku

- systém popruhů a opěry zad aktivuje spuštěním biologické zpětné vazby (biofeedbacku)
- redukce kyfózy v důsledku osteoporózy
- zvýšení mobility posílením svalů
- snížení bolesti

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném individuálním nasazení a nastavení.



šedá

Přednosti výrobku



Ergonomicky tvarované ramenní popruhy usnadňují nasazení a zvyšují komfort nošení




Měkký materiál s perforacemi zvyšuje cirkulaci vzduchu a pohodlně se nosí




Nově uspořádané provlékání popruhů zabraňuje překroucení

Studie

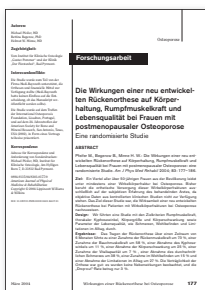

Účinek zádové ortézy Spinomed potvrdily randomizované studie. Kopie jsou k dispozici na vyžádání (číslo artiklu 99E22)

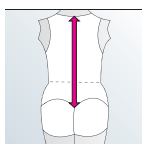

délka zad cm	až 43	44 – 49	50 – 55	56 – 61	62 – 67
velikost	XS	S	M	L	XL
číslo artiklu	5.669.051	5.669.052	5.669.053	5.669.054	5.669.055

Spinomed® active

Zádová ortéza k extenzi obratlů při osteoporóze a k posílení svalů tělesného jádra

Indikace


- osteoporotický kolaps kostí v oblasti hrudní a bederní páteře
- juvenilní Scheuermannova nemoc
- hyperkyfóza s chronickou bolestí zad

Mechanismus účinku


- integrované elastické pánevní a ramenní popruhy vytváří biologickou zpětnou vazbu, která aktivuje svaly trupu pacienta
- pomáhá narovnat hrudní páteř a omezit kyfózu
- dlouhodobé používání posiluje svalstvo a zvyšuje mobilitu pacienta
- pomáhá zmírnit tlak a snížit bolestivost
- nebrání hrudnímu ani břišnímu dýchání

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném individuálním nasazení a nastavení.

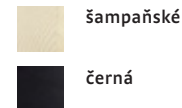

Přednosti výrobku

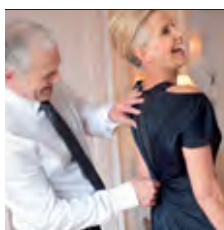


Ortézu není pod oblečením téměř vidět



Hliníková opěra zad je tvárná a lze ji snadno přizpůsobit potřebám konkrétního pacienta

Různé varianty podle individuálních potřeb pacientů (s košíčky, bez košíčků, s háčky (klín), suchým zipem (klín), barevné varianty)

Studie

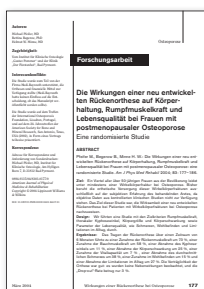

Účinek zádové ortézy Spinomed potvrdily randomizované studie. Kopie jsou k dispozici na vyžádání (číslo artiklu 99E22)

Použijte prosím náš list pro měření velikosti, číslo artiklu 99879, abychom stanovili správnou velikost.

Spinomed® active men

Zádová ortéza k extenzi obratlů při osteoporóze a k posílení svalů tělesného jádra

Indikace

- osteoporotický kolaps kostí v oblasti hrudní a bederní páteře
- juvenilní Scheuermannova nemoc
- hyperkyfóza s chronickou bolestí zad

Mechanismus účinku

- integrované elastické pánevní a ramenní popruhy vytváří biologickou zpětnou vazbu, která aktivuje svaly trupu pacienta
- pomáhá narovnat hrudní páteř a omezit kyfózu
- dlouhodobé používání posiluje svalstvo a zvyšuje mobilitu pacienta
- pomáhá zmírnit tlak a snížit bolestivost
- nebrání hrudnímu ani břišnímu dýchání

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném individuálním nasazení a nastavení.




šedá

Přednosti výrobku




Ortézu není pod oblečením téměř vidět

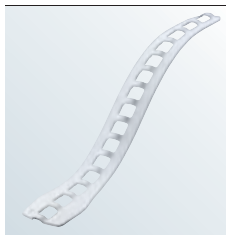

Hliníková opěra zad je tvárná a lze ji snadno přizpůsobit potřebám konkrétního pacienta

Studie

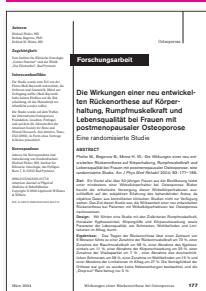

Účinek zádové ortézy Spinomed potvrdily randomizované studie. Kopie jsou k dispozici na vyžádání (číslo artiklu 99E22)

Použijte prosím náš list pro měření velikosti, číslo artiklu 99879, abychom stanovili správnou velikost.

medi 3 C

Tříbodová hyperextenzní ortéza s ráčnovým zapínáním

Indikace

- stabilní kompresivní zlomeniny těl obratlů střední a dolní hrudní páteře a bederní páteře
- hyperkyfóza při Scheuermannově nemoci
- konzervativní léčba neoperovatelných zlomenin těl obratlů bederní a hrudní páteře
- dočasná pooperační ortopedická léčba

Mechanismus účinku

- extenze páteře (thorakolumbální přechod)

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném individuálním nasazení a nastavení.



stříbrná

Přednosti výrobku




Ráčnové zapínání – jednoduché a bezpečné používání




Nastavitelná sternální opěrka umožňuje dynamické přizpůsobení pohybům těla

Vysoký komfort díky materiálu šetrnému vůči tělu

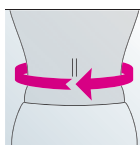

standardní sternální lišta 27 cm	délka trupu	obvod pasu	číslo artiklu
malá základní deska	45 – 53 cm	55 – 90 cm	5.6C0.001
velká základní deska	45 – 53 cm	91 – 125 cm	5.6C0.002

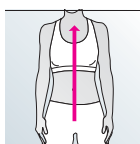

krátká sternální lišta 20 (cm)	délka trupu	obvod pasu	číslo artiklu
malá základní deska	37 – 45 cm	55 – 90 cm	5.6C7.001
velká základní deska	37 – 45 cm	91 – 125 cm	5.6C7.002

medi 4C flex

Hyperextenzní ortéza se zapínáním na přezku nebo na háčky

Indikace

- stabilní kompresivní zlomeniny obratlů dolní hrudní páteře a bederní páteře
- středně dlouhá imobilizace po operacích meziobratlových plotének
- osová stabilizace při osteoporotickém kolapsu kostí v oblasti hrudní a bederní páteře
- dočasná ortopedická léčba po otevřené operaci nestabilních zlomenin těl obratlů
- trvalá ortopedická léčba při neoperovatelných páteřních nádorech a metastázách
- pooperační ortopedická léčba po operaci nádorů a metastáz těl obratlů
- doléčování po operacích míšní dekomprese s vnitřní fixací nebo bez ní

Mechanismus účinku

- hyperextenze páteře zajišťuje stabilizaci v předozadní rovině
- rotační stabilita je omezena subklavikulárními extenzními podložkami
- stabilní konstrukce rámu omezuje laterální flexi

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném individuálním nasazení a nastavení.




stříbrná


Přednosti výrobku



K dispozici se zapínáním na přezku nebo na háčky

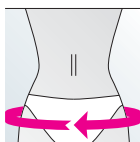

velikost	S	M	L	XL
obvod boků (cm)	60 – 75	76 – 90	91 – 105	106 – 115
běžný trup	39 – 47	42 – 50	45 – 53	48 – 56
krátký trup	36 – 44	39 – 47	42 – 50	45 – 53
ultrakrátký trup	32 – 40	35 – 43	38 – 46	41 – 49

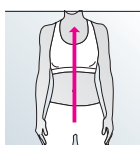

Pro verzi se zapínáním na přezku				
velikost	S	M	L	XL
číslo artiklu	5.5G1.□02	5.5G1.□03	5.5G1.□04	5.5G1.□05

□ = nahradte číslem pro variantu: 0 = běžný trup, 1 = krátký trup

Pro verzi se zapínáním na háčky				
velikost	S	M	L	XL
číslo artiklu	5.5G1.3□2	5.5G1.3□3	5.5G1.3□4	5.5G1.3□5

□ = nahradte číslem pro variantu: 0 = běžný trup, 1 = krátký trup, 2 = ultrakrátký trup

medi 4C

Čtyřbodová hyperextenzní ortéza s ráčnovým zapínáním

Indikace


- stabilní kompresivní zlomeniny obratlů dolní hrudní páteře a bederní páteře
- středně dlouhá imobilizace po operacích meziobratlových plotének
- osová stabilizace při osteoporotických kolapsech kostí v oblasti hrudní a bederní páteře
- dočasná ortopedická léčba po otevřené operaci nestabilních zlomenin těl obratlů
- trvalá ortopedická léčba při neoperovatelných páteřních nádorech a metastázách
- pooperační ortopedická léčba po operaci nádorů a metastáz těl obratlů
- doléčování po operacích míšní dekomprese s vnitřní fixací nebo bez ní

Mechanismus účinku

- hyperextenze páteře zajišťuje stabilizaci v předozadní rovině
- rotační stabilita je omezena subklavikulárními extenzními podložkami
- stabilní konstrukce rámu omezuje laterální flexi

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném individuálním nasazení a nastavení.

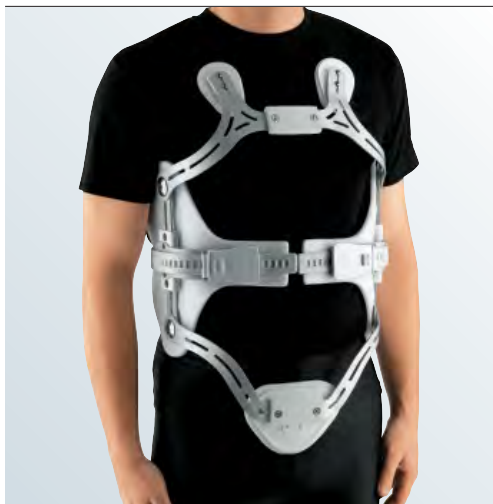

stříbrná


Přednosti výrobku



Ráčnové zapínání – jednoduché a bezpečné používání



Výborně padne díky neomezeně variabilnímu nastavení ve třech rozměrech

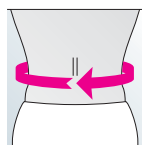

bederní pás (cm)	až 125	až 125
velikost	I	II
zádová pelota (cm)	22	28
číslo artiklu	5.662.011	5.662.012





Rameno / Loket

Bandáž ramene s omezením pohybu

Indikace

- proximální zlomeniny hlavice pažní kosti, jamky ramenního kloubu a lopatky, luxace akromioklavikulárního kloubu
- konzervativní léčba bolestivé osteoartritidy nebo akutního či chronického vykloubení ramene
- pooperační léčba po implantaci endoprotéz ramenního kloubu nebo po stabilizaci ramenního kloubu
- rekonstrukce úponů rotátorové manžety a refixace napojení šlachy bicepsu (léze SLAP)

Mechanismus účinku


- omezení a prevence škodlivých pohybů díky nastavitelné, vyznačené limitaci zevní rotace, abdukce a anteflexe ramenního kloubu
- elastický úplet vyvíjí mírný lokální kompresivní účinek na povrchové měkké tkáně, který redukuje a zabraňuje otékání a snižuje svalové napětí
- koriguje posturální deficity ramene přesným vycentrováním hlavice pažní kosti v jamce ramenního kloubu a zmírněním bolesti ramene



Kód VZP:

04 - 0063876


Přednosti výrobku

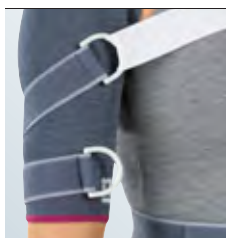

Systém pružných popruhů umožňuje individuální nastavení a variabilní omezení pohybu ramenního kloubu

Inteligentní uspořádání popruhů zaručuje pohodlné nošení a plnou funkci i v běžném oblečení

stříbrná

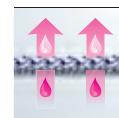


Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone

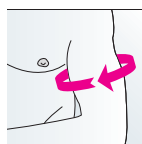

obvod paže (cm)	až 26	26 – 29	29 – 33	33 – 36	36 – 39
velikost	0	I	II	III	IV
číslo artiklu	K.30○.200	K.30○.201	K.30○.202	K.30○.203	K.30○.204

○ = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

medi SLK 90

Ortéza s 5° abdukcí, 0° zevní rotací

Indikace

- pooperační imobilizace po zadní stabilizaci ramene nebo nestabilitě ve více směrech
- konzervativní léčba po traumatické zadní luxaci ramene s reverzní Bankartovou lézí
- imobilizace při obousměrné přední a zadní nestabilitě ramene nebo po uvolnění předního pouzdra
- konzervativní léčba po zlomeninách velkého hrbolku kosti pažní (tuberculum majus)
- přenos širokého zádového svalu (m. latissimus dorsi)

Mechanismus účinku

- umožňuje polohování ramene v úhlu 90° k frontální rovině, a tím uvádí zadní pouzdro do optimální pozice



Kód VZP:

04 - 0140288

Přednosti výrobku



Pohodlné nošení

Pás snižuje tření v oblasti ramene a krku




Anatomicky tvarovaný polštář

Zaručeně bezpečná opora ramene v úhlu 90° k frontální rovině



Opěrka ruky poskytuje oporu ruce a umožňuje mírné procvičování předloktí

Jednoduché otevírání vaku na předloktí podporuje včasnou funkční následnou péči (např. fyzioterapii)

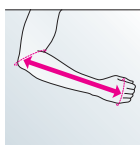

délka předloktí (cm)	až 34	35 – 39	více než 39
velikost	S	M	L
číslo artiklu	R.133.002	R.133.003	R.133.004

0 = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

šedá

medi Easy sling

šedá

Podpora vnitřní rotace

Indikace

- Imobilizace po těchto stavech:
 - vykloubení ramene
 - zlomenina hlavičky pažní kosti
 - zlomenina klíční kosti
 - utržení akromioklavikulárního spojení
 - kontuze ramene
- Pooperační léčba po těchto stavech:
 - stabilizace ramene
 - subakromiální dekomprese
 - částečná resekce akromioklavikulárního kloubu
 - reparace rotátorové manžety
 - stabilizace akromioklavikulárního kloubu
 - osteosyntéza
- Anatomické a inverzní ramenní endoprotézy

Mechanismus účinku

- Znehybňuje ramenní kloub při vysoce variabilních stupních imobilizace
- Modulární design pro jednoduchou a pohodlnou manipulaci
 - během dne: regulovaná mobilita
 - v noci: úplná fixace



Přednosti výrobku



Úplná fixace přes noc s
přídavným břišním
popruhem



Varianta k odlehčení
krčních svalů

Výška	až 185	nad 185
ramenní pás (cm)	150	190
velikost	S	L
číslo artiklu	R.030.G02	R.030.G04

medi Armschlinge

Podpora vnitřní rotace

Indikace

- pooperační imobilizace
- vykloubení ramene

Mechanismus účinku

- úleva pro ramenní kloub, pažní kost a loket
- fixací horní končetiny v poloze blízko u těla znehybňuje rameno



Kód VZP:

04 - 0140292



tmavě šedá



medi Kidz–
k dispozici též v
dětské verzi

Přednosti výrobku



Univerzální velikost

Rukáv lze přizpůsobit na libovolnou velikost – stačí jednoduše přeložit a připevnit jezdcí se suchými zipy

Lze použít na pravé i levé straně

velikost univerzální

číslo artiklu R.040.G09

medi Arm fix

Podpora vnitřní rotace

Indikace

- konzervativní léčba po přední luxaci ramene či chronické subluxaci
- konzervativní a pooperační léčba těchto stavů:
 - proximální zlomeniny hlavice pažní kosti
 - zlomeniny lopatky
 - luxace akromioklavikulárního kloubu
- impingement syndrom a artróza akromioklavikulárního kloubu
- konzervativní léčba bolestivé osteoartritydy

Kontraindikace

- konzervativní a pooperační léčba zadní luxace ramene

Mechanismus účinku

- téměř úplná imobilizace ramenního a loketního kloubu
- úleva od bolesti při konzervativní léčbě i po chirurgických zákrocích
- korekce nesprávné polohy s vystředěním hlavice pažní kosti v pouzdru ramenního kloubu



Kód VZP:

04 - 0140291

Přednosti výrobku



Pažní manžeta

Preformovaný pažní manžeta usnadňuje uchopení při zapínání




Rukáv na předloktí

Rukáv na předloktí se snadno otevírá, což umožňuje pasivní a kyvadlové cvičení



Jednoduché otevírání vaků na paži a předloktí podporuje včasné funkční pohybování (např. kyvadlové pohyby)

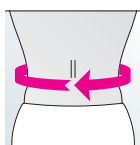

	medi Arm fix Mini	medi Arm fix	medi Arm fix	medi Arm fix Maxi
šířka břišního pásu (cm)	12	12	16	12
obvod břicha (cm)	do 85	85 – 125	85 – 125	125 – 140
číslo artiklu	R.050.619	R.050.719	R.050.419	R.050.519

medi Humeral fracture brace

Ortéza pro zlomeninu pažní kosti

Indikace

- pooperační léčba subkapitální zlomeniny pažní kosti nebo zlomeniny těla pažní kosti
- konzervativní léčba zlomenin pažní kosti



černá

Přednosti výrobku



Rigidní výztuhy lze odstranit, aby ortéza dobře padla, nebo při rentgenovém vyšetření




Pažní popruhy jsou plně nastavitelné
Možnost změnit polohu pažních popruhů nebo je odstranit znamená flexibilitu při použití a nastavení komprese



Vrchní vrstva s plochým profilem chrání oblečení pacientů

Prodlužovací polstrování paže (prodlužuje rukáv o 12 cm)
dodává se jako příslušenství, číslo artiklu RE90039

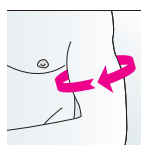

obvod paže (cm)	21 – 28	26 – 34	31 – 40
velikost	S	M	L
číslo artiklu	R.091.012	R.091.013	R.091.014

○ = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

medi Shoulder sling

Imobilizační ortéza ramenního kloubu

Indikace

- kontuze a subluxace ramene
- vykloubení ramene
- léze rotátorové manžety
- stabilní subkapitální zlomeniny pažní kosti
- zlomeniny lopatky

Mechanismus účinku

- stabilní fixace ramene a paže
- další stabilizace hrudním popruhem



Kód VZP:

04 - 0140293

Přednosti výrobku

Umožňuje bezproblémové kontroly rány

Možnost omezený cvičení v pozdějších fázích léčby díky snadnému sejmutí ramenního závěsu

šedá

velikost univerzální

číslo artiklu R.030.G19

medi SAS[®] comfort

Ortéza s 15° abdukcí

Indikace:

- pooperační imobilizace při těchto stavech:
 - ruptury rotátorové manžety
 - zlomeniny hlavičky pažní kosti
 - implantace ramenních endoprotéz
 - luxace akromioklavikulárního kloubu

Mechanismus účinku:

- laterální polohování pomocí anatomicky tvarovaného, přesně sedícího polštáře pro odlehčení ventrálního okraje a pouzdra
- abdukce v poloze 15° pomáhá zabránit adhezím v podpažní výchlipce kloubní dutiny (zmrzlé rameno)
- okamžitá pooperační aktivní a pasivní mobilizace ruky, zápěstí a loketního kloubu otevřením závěsu předloktí bez nutnosti sundat celou bandáž
- včasná funkční následná léčba umožňuje pooperační fyzioterapii



šedá

Přednosti výrobku



Opěrka ruky (s integrovaným míčkem na cvičení) pacientům umožňuje procvičovat předloktí a zápěstí


- zlepšená cirkulace
- zabraňuje ztuhnutí zápěstí



Anatomicky tvarovaný polštář zaručuje pohodlnou oporu paže



Speciální uchycení popruhů v kroužku odklání zatížení směrem od zdravé oblasti ramene / krku

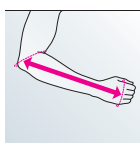

délka předloktí (cm)	až 34	více než 35
velikost	S	L
číslo artiklu	R.012.012	R.012.014

0 = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

medi SAS[®] 15

Ortéza s 15° abdukcí

Indikace

- impingement syndrom – při akutním nebo chronickém zánětu a po otevřené nebo artroskopické dekompresi a akromioplastice
- rekonstrukce po rupturách rotátorové manžety
- konzervativní nebo pooperační léčba subakromiální burzitidy
- odlehčení ventrálního okraje a pouzdra po otevřené nebo artroskopické stabilizaci ramene
- konzervativní imobilizace při luxaci / vykloubení ramene

Mechanismus účinku


- laterální polohování pomocí anatomicky tvarovaného, přesně sedícího polštáře pro odlehčení ventrálního okraje a pouzdra
- abdukce v poloze 15° pomáhá zabránit adhezím v podpažní výchlípce kloubní dutiny (zmrzlé rameno)
- okamžitá pooperační aktivní a pasivní mobilizace ruky, zápěstí a loketního kloubu otevřením závěsu předloktí bez nutnosti sundat celou bandáž
- včasná funkční následná léčba umožňuje pooperační fyzioterapii



Kód VZP:

04 - 0140289

Přednosti výrobku

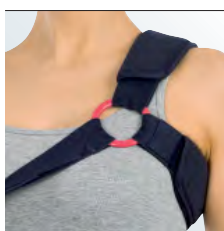

Pohodlné nošení

Pás snižuje tření v oblasti ramene a krku



Opěrka ruky poskytuje oporu ruce a umožňuje mírné procvičování předloktí




K dispozici také jako verze s nepřerušným popruhem – bez plastového kroužku (medi SAS 15 SB – číslo artiklu R010.402-4)

Jednoduché otevírání vaku na předloktí podporuje včasnou funkční následnou péči (např. fyzioterapii)

Pohodlné nošení díky nízké hmotnosti a froté polstrování

Lze nosit na pravé nebo levé straně, dobře padne

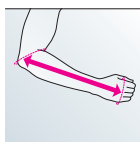

délka předloktí (cm)	až 34	35 – 39	více než 39
velikost	S	M	L
číslo artiklu	R.011.002	R.011.003	R.011.004

medi SAS® 45

Ortéza s 30° nebo 45° abdukcí

Indikace

- rekonstrukce po rupturách rotátorové manžety
- imobilizace po implantaci ramenních endoprotéz
- konzervativní nebo pooperační léčba subakromiální burzitidy
- částečné ruptury rotátorové manžety
- stav po akromioplastice
- odlehčení ventrálního okraje a pouzdra po otevřené nebo artroskopické stabilizaci ramene
- konzervativní imobilizace při luxaci ramene

Mechanismus účinku

- laterální polohování pomocí anatomicky tvarovaného, přesně sedícího polštáře pro odlehčení ventrálního okraje a pouzdra
- abdukce v poloze 30° nebo 45° pomáhá zabránit adhezím v podpažní výchlipce kloubní dutiny (zmrzlé rameno)



Kód VZP:

04 - 0140287

Přednosti výrobku



Pohodlné nošení

Pás snižuje tření v oblasti ramene a krku




Anatomicky tvarovaný polštář

Zaručeně bezpečná opora; nekluže dozadu



Opěrka ruky poskytuje oporu ruce a umožňuje mírné procvičování předloktí

Univerzální upínání umožňuje dlahu nosit nalevo i napravo

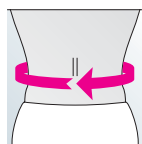

obvod břicha (cm)	až 104	více než 105
velikost	S	L
číslo artiklu	R.021.002	R.021.004

šedá

medi SAS® multi

šedá

Ortéza s 15° abdukcí

Indikace

Pooperační imobilizace při těchto stavech:

- ruptury rotátorové manžety
- zlomeniny hlavice pažní kosti
- implantace ramenních endoprotéz
- imobilizace po zadní luxaci ramene

Mechanismus účinku

- odlehčuje tlak na subakromiální prostor
- zajišťuje podporu oblastem ventrálního okraje a pouzdra
- zabraňuje adhezi processus axilaris prsní žlázy



Přednosti výrobku



Polstrovaný bederní pás

Bezpečná opora i vleže; neklouže dozadu




Pohodlné nošení

Pás snižuje tření v oblasti ramene a krku



Nastavitelná zevní rotace

Samostatný klín umožňuje polohování paže podle individuálních potřeb při bezpečné zevní rotaci

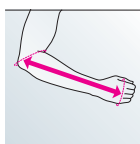

délka předloktí (cm)	až 34	více než 35
velikost	S	L
číslo artiklu	R.022.009	R.023.009

0 = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

medi SAK

Ortéza s variabilní abdukcí (10° až 60°)

Indikace

- impingement syndrom – při akutním nebo chronickém zánětu a po otevřené nebo artroskopické dekompresi a akromioplastice
- rekonstrukce po rupturách rotátorové manžety
- implantace ramenních endoprotéz
- zmrzlé rameno po anestezii

Mechanismus účinku

- imobilizace ramenního kloubu s abdukcí 10° až 60°
- dočasné odlehčení tlaku na subakromiální prostor
- volitelná beztlížná mobilizace ramenního kloubu v horizontální rovině
- mobilizace k prevenci srůstů v subakromiálním, subkorakoidním a subdeltoidálním prostoru
- pažní klín prohlubuje zabezpečení ramenního kloubu



Kód VZP:

04 - 0140290

Přednosti výrobku



Pohodlné nošení
Pás snižuje tření v oblasti ramene a krku



Pažní klín
Zaručeně bezpečná opora paže v abdukční poloze



Opěrka ruky poskytuje oporu ruce a umožňuje mírné procvičování předloktí



Velká kontaktní plocha zaručuje pocit bezpečí

velikost univerzální

číslo artiklu 5.830.401

medi Elbow support

Pletená loketní bandáž

Indikace

- otoky a kloubní výpotky
- revmatická a osteoartritická podráždění

Mechanismus účinku

- ulevuje podrážděnému kloubu a zlepšuje průtok krve do okolních měkkých tkání stálou kompresí a masáží při pohybu pacienta



Kód VZP:

04 - 0140285

světlá




Přednosti výrobku

Vysoce elastická, anatomicky tvarovaná, pletená bandáž s elasticitou v obou směrech

Kompresivní účinek zlepšuje resorpci otoků a výpotků

Rychlé zmenšení otoku a úleva od bolesti v postižené oblasti

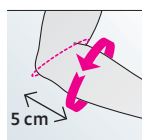

obvod (cm)	20 – 23	23 – 26	26 – 29	29 – 32	32 – 35
velikost	I	II	III	IV	V
číslo artiklu	3.266.001	3.266.002	3.266.003	3.266.004	3.266.005

Epicomed

Měkká loketní bandáž se silikonovými pelotami a utahovacím popruhem

Indikace

- laterální epikondylitida (tenisový loket) a mediální epikondylitida (golfový loket)
- vykloubení loketního kloubu
- kloubní výpotek a otok způsobené artritidou a osteoartritidou
- chronický pooperační a poúrazový zánět

Mechanismus účinku

- masážní účinek kompresivní pleteniny a silikonové vložky podporuje hojení
- specifické oblasti tlaku k omezení bolesti a odlehčení tlaku u úponů šlach

NOVÉ:
Lépe padne



Kód VZP:

04 - 0078943



Přednosti výrobku



Díky inovativnímu úpletu horní okraj absolutně netlačí a dokonale padne na libovolnou dolní končetinu



Odnímatelný popruh slouží k individuálnímu nastavení tlaku

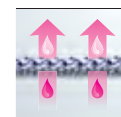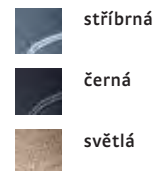


Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone

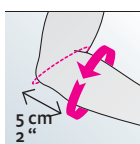

obvod (cm)	17 – 20	20 – 23	23 – 26	26 – 29	29 – 32	32 – 35
velikost	I	II	III	IV	V	VI
číslo artiklu	K.400.Δ01	K.400.Δ02	K.400.Δ03	K.400.Δ04	K.400.Δ05	K.400.Δ06

Δ = nahradte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 5 = černá, 8 = světlá

medi Elbow strap


Epikondylární páska

Indikace

- epikondylitida
(např. tenisový nebo golfový loket)

Mechanismus účinku

- tlak pásky snižuje napětí šlach

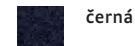

Kód VZP:

04 - 0140286

Přednosti výrobku

Vzduchová pelota

Nastavení tlaku podle individuálních potřeb

Vyrobeno z materiálu (bavlna / lycra) šetrného vůči pokožce

velikost univerzální

číslo artiklu R.200.009

medi Epibrace

Páska proti epikondylitidě

Indikace

- epikondylitida (např. tenisový nebo golfový loket)

Mechanismus účinku

- pelota vyvíjí tlak přímo na svalstvo předloktí. Tím se snižuje tlak na zanícené úpony svalů a šlach v lokti



Kód VZP:

04 - 0093653

šedá

Přednosti výrobku



Pohyblivá pelota plněná vzduchem zajišťuje rovnoměrný tlak na celou oblast a zabraňuje vzniku bodů s maximálním tlakem



Pacient díky měřítku odečítá přesný tlak. Kdykoli lze provést individuální úpravy pomocí volně stavitelného popruhu

Pohyblivou vzduchovou pelotu lze přemístit. Pásku tak lze použít mediálně i laterálně

velikost univerzální

číslo artiklu R.110.009

medi Epico ROMs

Loketní mobilizační ortézy s imobilizací proximálního radioulnárního kloubu

Indikace

- konzervativní léčba loketní nestability samotné nebo v kombinaci s jiným zraněním
- ortopedická léčba mediálních nebo laterálních zlomenin epikondylu
- pooperační léčba po implantaci endoprotézy
- pooperační léčba po stabilizaci loketního kloubu
- funkční následná léčba stabilních zlomenin
- pasivní mobilizace po artrolýze lokte
- pooperační léčba instabilit loketních vazů

Mechanismus účinku

- ortéza umožňuje a reguluje pohyb při individuální včasné funkční terapii
- pohyb kloubu je omezen na 0°–120°, což dává volnost pohybu přiměřenou rané fázi mobilizace; tím se zvyšuje pohyblivost kloubů a urychluje hojení
- v důsledku povoleného a skutečně fixního rozsahu pohyblivosti se aktivuje svalová pumpa, čímž se zlepšuje odtok krve a lymfy
- flexe / extenze omezená na rozmezí 0°–120°, lze nastavit v krocích po 10°

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Kód VZP:

04 - 0140284

Přednosti výrobku



Omezení na 0°–120° slouží k znehybnění loketního kloubu fixací paže a předloktí



Ploché kloub quickset
Příjemné nošení, dokonce i pod oblečením. Kloub lze nastavit pouhým stisknutím tlačítka




Polstrování
Vyrobeno z inovativního pěnového materiálu, padne těsně a spolehlivě - zvlněný povrch mírně stlačuje svalové receptory, a tím stimuluje metabolismus a brání vzniku svalového napětí



Hliníkovou konstrukci lze přesně natvarovat a přizpůsobit tvaru každé paže

Délku opěrky ruky lze upravit – ortéza je bezpečně upnutá k paži

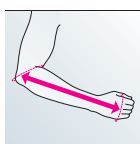

délka předloktí (cm)	až 29	29 – 42
velikost	S	L
číslo artiklu	R.032.002	R.032.004

0 = nahradíte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá



šedá/grafit



medi Kidz –
k dispozici též v
dětské verzi

medi ESS

Loketní polohovací systém pro operace ramene vsedě

Aplikace

- spolehlivá opora pro bezpečné a flexibilní polohování horní končetiny pro chirurgické zákroky vsedě
- jednoduchá konstrukce umožňuje rychlé a bezpečné použití v celém průběhu operace
- dlouhodobé používání díky resterilizaci: materiál aquamid a popruhy lze sterilizovat a použít opakovaně, systém je proto efektivní a hospodárný

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



bílá

Přednosti výrobku



medi ESS během operace v poloze vsedě



Nastavení velikosti:
Flexibilní skořepina a systém popruhů umožňují přizpůsobení různým velikostem paže



Dlouhodobé používání díky resterilizaci
Materiál aquamid a popruhy lze sterilizovat a použít opakovaně, systém je proto efektivní a hospodárný



Perforace
Perforace v loketní oblasti umožňuje odtok proplachovací kapaliny

velikost univerzální

číslo artiklu R.032.002





Ruka

Manumed active

Měkká zápěstní bandáž se stabilizační dlahou

Indikace

- zranění zápěstí, např. podvrtnutí a natažení
- osteoartritida zápěstí
- nestabilita
- tendosynovitida (zánět šlach a kloubního pouzdra)
- dráždivé stavy (poúrazové, pooperační a revmatické)

Mechanismus účinku

- volární dlahu stabilizuje a snižuje namáhání zápěstí
- kruhový popruh posiluje úlevu namáhání zajišťovanou kompresivním úpletem a volární prstovou dlahou
- cílené odlehčení tlaku na bodcovitý výběžek ulny, kterému dále napomáhá anatomicky zkonstruovaný popruh



Kód VZP:

04 - 0093988

Přednosti výrobku





Měkký pletený okraj na předloktí zajišťuje hranu bez tlaku, kroucení či škrcení

Příslušenství



Dodávaná nasazovací pomůcka pomáhá při navlékání

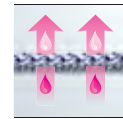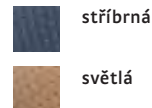

Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone



medi Kidz – ve velikostech I a II vhodné též pro děti



obvod zápěstí (cm)	13 – 15	15 – 17	17 – 19	19 – 21
velikost	I	II	III	IV
číslo artiklu	K.41O.Δ01	K.41O.Δ02	K.41O.Δ03	K.41O.Δ04

O = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá Δ = nahrad'te číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 8 = světlá

medi wrist support

Zápěstní bandáž

Indikace

- chronické, pouřazové nebo pooperační poranění měkkých tkání zápěstí
- paréza nervus radialis
- imobilizace po mírném až středně těžkém podvrtnutí
- konzervativní léčba tendinitidy nebo tendosynovitida
- revmatoidní artritida
- stavy po imobilizaci

Mechanismus účinku

- imobilizace a stabilizace zápěstí



šedá

Kód VZP:

04 - 0140283

Přednosti výrobku

Extra široká podpůrná páska pro zápěstí

Tvarovatelná hliníková dlaha

Vyrobeno z odolného materiálu (bavlna / lycra)
šetrného vůči pokožce



obvod zápěstí (cm)	10 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 26
velikost	S	M	L	XL
číslo artiklu	R.200.001	R.200.002	R.200.003	R.200.004

0 = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Manumed

Zápěstní bandáž se stabilizační dlahou

Indikace

- chronické, poúrazové nebo pooperační poranění měkkých tkání zápěstí
- paréza nervus radialis
- imobilizace při distorzích
- konzervativní léčba tendinitidy nebo tendosynovitidy
- revmatoidní artritida


Mechanismus účinku

- imobilizace a stabilizace zápěstí tvarovatelnou hliníkovou dlahou



Kód VZP:

04 - 0078949

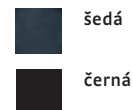


medi Airtex



medi Kidz –
k dispozici též v
dětské verzi

Přednosti výrobku

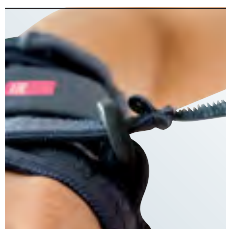

Navlékáací systém, který
snadno padne



Anatomicky tvarovaná
hliníková dlaha, kterou
lze uzpůsobit podle
individuálních potřeb



obvod zápěstí (cm)	až 14	14 – 18	19 – 23	24 – 28
velikost	0	I	II	III
číslo artiklu	R.110.○△0	R.110.○△1	R.110.○△2	R.110.○△3

○ = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá △ = nahrad'te číslem pro barvu: 3 = tmavě šedá, 0 = černá

Manumed tri

Zápěstní ortéza k omezení pronace a supinace

Indikace

- syndrom karpálního tunelu
- tendovaginitida
- omezení pohybu po poranění triangulárního fibroartilaginózního komplexu
- stav po zlomenině kosti vřetenní – funkční terapie
- omezení pohybu po poranění discus articularis
- artróza distálního radioulnárního kloubu
- syndrom ulnárního tunelu
- stavy po zlomeninách zápěstí
- stav po operaci / sutuře discus articularis

Mechanismus účinku


- omezení pohybu zápěstí ve třech rovinách:
 - flexe / extenze
 - abdukce / addukce
 - pronace / supinace



Kód VZP:

04 - 0140598

Přednosti výrobku

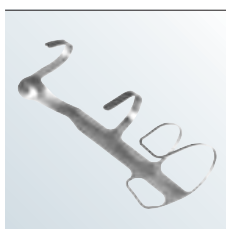

Individuální
přizpůsobení hliníkové
výztuhy ruce pacienta



**Snadná manipulace z
pohledu pacienta**
Snadné nasazení
jednoduše navléknutím
systému s integrovanými
úchytnými manžetami




Zvýšená volnost pohybu
díky možnosti ohýbání
ruky


šedá



Omezení pronace

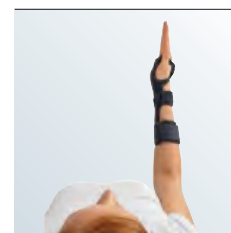

Neutrální poloha

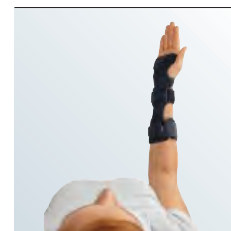

Omezení supinace



obvod zápěstí (cm)	14 – 18	19 – 23
velikost	I	II
číslo artiklu	R.111.001	R.111.002

0 = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Manumed T

Zápěstní ortéza s fixací palce

Indikace

- podvrtnutí nebo distorze zápěstí nebo palce
- pooperační fixace zápěstí nebo palce
- léze ulnárního kolaterálního vazu bazálního kloubu palce
- tendinitida a tendinopatie zápěstí nebo palce
- zánětlivé fáze revmatických chorob


Mechanismus účinku

- fixace a stabilizace zápěstí, sedlového kloubu palce a bazálního kloubu palce




Kód VZP:

04 - 0140282

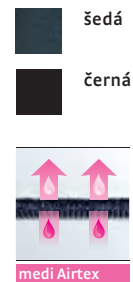

Přednosti výrobku

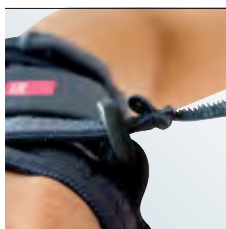

Navlékáací systém, který snadno padne



Anatomicky tvarovaná hliníková dlaha, kterou lze uzpůsobit podle individuálních potřeb



obvod zápěstí (cm)	až 14	14 – 18	19 – 23	24 – 28
velikost	0	I	II	III
číslo artiklu	R.110.○Δ0	R.110.○Δ1	R.110.○Δ2	R.110.○Δ3

○ = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá Δ = nahrad'te číslem pro barvu: 6 = šedá, 2 = černá

medi CTS

Zápěstní bandáž s prstovou dlahou

Indikace

- konzervativní léčba a následná péče po operaci syndromu karpálního tunelu
- imobilizace zápěstí a prstů

Mechanismus účinku

- redukce otoku, zánětu a bolesti imobilizací zápěstí a prstů



šedá

Kód VZP:

04 - 0140597


Přednosti výrobku



Velmi pohodlné nošení díky otevřené a extrémně lehké konstrukci



Dlaňová dlaha je anatomicky předtvarovaná a lze ji upravit podle individuálních potřeb

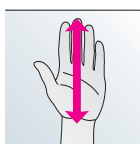

délka ruky (cm)	až 15	15 – 17	17 – 19	19 – 22
velikost	0	I	II	III
číslo artiklu	R.110.000	R.110.001	R.110.002	R.110.003

medi thumb support

Palcová ortéza

Indikace

- poranění karpometakarpálního a metakarpofalangeálního kloubu palce
- uvolnění vazů palce
- artróza karpometakarpálního kloubu palce
- revmatoidní artritida

Mechanismus účinku

- imobilizace palce



šedá

Kód VZP:

04 - 0140281

Přednosti výrobku

Vyrobena z materiálu šetrného vůči pokožce (bavlna / lycra)

Tvarovatelná hliníková dlah



obvod zápěstí (cm)	10 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 26
velikost	S	M	L	XL
číslo artiklu	R.210.001	R.210.002	R.210.003	R.210.004

0 = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Rhizomed® soft

Dlaha pro imobilizaci palce

Indikace

- artritida karpometakarpálního kloubu
- poranění vazů (např. lyžařský palec)
- zánět kloubu palce

Přínos pro léčbu

- účinná stabilizace metakarpofalangeálního a karpometakarpálního kloubu palce
- integrované stabilizační vyztužení zajišťuje spolehlivou imobilizaci
- dva nastavitelné pásky na palec zajišťují, že dlaha padne při libovolném tvaru ruky a zvyšují stabilitu
- polootevřená forma dlaha se přizpůsobuje různým stupňům otoku palce
- stisk mezi palcem a ukazováčkem a úchop jsou zachovány



černá

Přednosti výrobku



Velmi pohodlné nošení

Polootevřený tvar dlaha a konstrukce z elastické, prodyšné tkaniny zaručují vysoký komfort nošení a přizpůsobivost různým stupňům otoku



Zvýšená stabilita

Pásky opatřené suchým zipem, které lze nastavit podle individuální potřeby, dále zvyšují stabilitu



Snadná manipulace

Široký otvor znamená snadné nasazení a odstranění s co nejmenší bolestí



Spolehlivá imobilizace

Integrované stabilizační vyztužení zajišťuje spolehlivou imobilizaci zraněného místa



obvod zápěstí (cm)	13 – 17	18 – 23
velikost	I	II
číslo artiklu	R.141.001	R.141.002

Rhizomed®

Ortopedická ortéza sedlového kloubu palce

Indikace

- poranění laterálních vazů sedlového kloubu palce (lyžařský palec)
- podráždění bazálního a sedlového kloubu palce (např. artritida bazálního kloubu)
- distorze

Mechanismus účinku

- stabilizace sedlového a bazálního kloubu palce



Kód VZP:

04 - 0093172

černá

Přednosti výrobku



Individuálně nastavitelné díky hliníkové konstrukci



Otevřená konstrukce usnadňuje nasazení a zabraňuje pocení



Snadno padne díky navlékacímu systému a upínacím popruhům



délka (cm)	až 8	8 – 10	10 – 12	více než 12
velikost	XS	S	M	L
číslo artiklu	R.140.001	R.140.002	R.140.003	R.140.004

0 = nahradte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá





Kyčel

medi orthocox

Kyčelní ortéza pro kompresi kyčle a regulaci rotace kyčle

Indikace

- intertrochanterická repositionní osteotomie
- vnitřní fixace transtrochanterických zlomenin
- totální náhrada kyčelního kloubu

Mechanismus účinku

- reguluje rotaci kyčle
- optimální komprese kyčelní oblasti
- opakovaně použitelné po převazu
- napomáhá mobilizaci pacienta
- snadný přístup pro převaz



šedá

Kód VZP:


04 - 0140308

Přednosti výrobku

Jednoduchá aplikace šetří čas

Velmi pohodlné nošení díky vysoce propustnému a hypoalergennímu materiálu šetrnému vůči pokožce

Upozornění: Štítek je umístěn na vnější části výrobku, aby nedráždil chirurgickou ránu

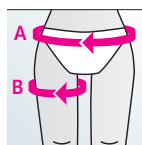

(A) obvod boků (cm)	70 – 90	85 – 105	100 – 120	115 – 140	130 – 160
(B) obvod stehna (cm)	50 – 60	55 – 70	65 – 80	75 – 90	75 – 90
velikost	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	8.08○.002	8.08○.003	8.08○.004	8.08○.005	8.08○.006

○ = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

medi Hip one

černá /
bílá

Funkční ortéza kyčelního kloubu

Indikace

- konzervativní léčba kyčle a vykloubení kyčelního kloubu
- úrazové vykloubení kyčelního kloubu
- zlomenina acetabula
- pooperační stavy
- luxace kyčelní endoprotézy
- náhrada kyčelní endoprotézy
- rekonstrukce acetabula
- zlomenina hlavice stehenní kosti
- korekční osteotomie

Mechanismus účinku

- chrání proti vykloubení / luxaci
- řízená včasná funkční terapie cvičením
- omezení extenze / flexe se nastavuje v 15° krocích do 90°
- dynamická abdukce

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Přednosti výrobku




Kyčelní díl se snadno tvaruje



Pohodlí díky odtlumenému polstrování



Variabilní nastavení úhlů

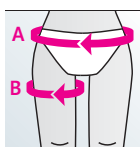

(A) obvod kyčelního dílu (cm)	70 – 90	90 – 110	110 – 135
velikost	S	M	L
číslo artiklu	5.5F9.1○2	5.5F9.1○3	5.5F9.1○4

○ = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

(B) obvod stehenního dílu (cm)	38 – 50	50 – 62	62 – 76
velikost	S	M	L
číslo artiklu	5.5F9.2○2	5.5F9.2○3	5.5F9.2○4

○ = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Objednávka kompletního výrobku vyžaduje dvě čísla artiklu: kyčelní díl a stehenní díl

měření: A obvod boků

B obvod stehna měřený 5 cm pod rozkrokem





Koleno

medi patella tendon support

Infrapatelární bandáž

Indikace

- bolest v souvislosti s nesprávnou patelofemorální geometrií

Mechanismus účinku

- tlak na šlachu čtyřhlavého svalu zlepšuje proprioceptivní funkci a tím posiluje svalovou podporu kolenního kloubu



šedá

Kód VZP:

04 - 0093171

Přednosti výrobku

Anatomicky tvarovaný polštářek

Vyrobena z materiálu (bavlna / lycra) šetrného vůči pokožce

velikost univerzální

číslo artiklu G.200.009

medi elastic knee support

Bandáž s obousměrnou elasticitou

Indikace

- veškeré záněty nebo namožení kolene včetně stavů po artroskopii a pooperačních stavů
- namožení svalů a vazů
- burzitida
- chronické degenerativní onemocnění kloubů
- artritida a osteoartritida

Mechanismus účinku

- ulevuje podrážděnému kloubu a zlepšuje průtok krve do okolních měkkých tkání
- stálou kompresí a masáží při pohybu pacienta



světlá



Přednosti výrobku

model 601:
obousměrná elasticita, anatomické tvarování

Kód VZP: 04 - 0093650



model 602:
stejný jako 601, navíc pás silikonových bodů u horního okraje zabraňuje posunutí (i při cvičení)



model 603:
stejný jako 601, ale se dvěma mediálními a laterálními ocelovými spirálami


Kód VZP: 04 - 0078948



model 605:
stejný jako 601, ale s otvorem na česku a dvěma mediálními a laterálními ocelovými spirálami

Kód VZP: 04 - 0078948

II. kompresivní třída

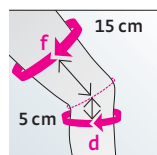

obvod "f" (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
obvod "d" (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
velikost	I	II	III	IV	V	VI	VII
číslo artiklu modelu 601	3.280.001	3.280.002	3.280.003	3.280.004	3.280.005	3.280.006	3.280.007
číslo artiklu modelu 602	3.281.001	3.281.002	3.281.003	3.281.004	3.281.005	3.281.006	3.281.007
číslo artiklu modelu 603	3.290.001	3.290.002	3.290.003	3.290.004	3.290.005	3.290.006	3.290.007
číslo artiklu modelu 605	3.290.101	3.290.102	3.290.103	3.290.104	3.290.105	3.290.106	3.290.107

Genumedi®

Kolenní bandáž se silikonovou patelární pelotou

Indikace

- mírná nestabilita kolenního kloubu
- kloubní výpotky a otoky
- chronický pooperační a poúrazový zánět
- osteoartrtida a artritida
- syndrom patelofemorální bolesti

Mechanismus účinku

- masážní účinek kompresivní pleteniny a silikonové vložky zlepšuje krevní oběh a napomáhá vstřebávání hematomů a otoků
- bežešvá tvarovaná bandáž kolene zlepšuje propriocepci a svalovou podporu (stabilizace kolene)




Kód VZP:

04 - 0078945

Přednosti výrobku




Maximální odlehčení tlaku na česčku díky speciálnímu vnitřnímu okraji silikonového kroužku

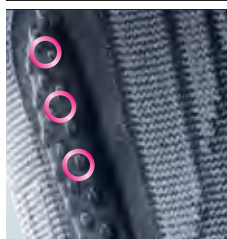


Protiskluzový systém s texturovaným silikonem v mediálním a laterálním směru

K dispozici též verze vyráběná na míru

- stříbrná
- černá
- světlá

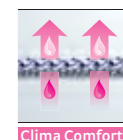


medi Kidz – ve velikostech I a II vhodné též pro děti

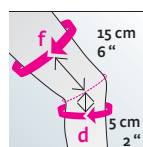

obvod "f" (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
obvod "d" (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
velikost	I	II	III	IV	V	VI	VII
číslo artiklu	K.100.Δ01	K.100.Δ02	K.100.Δ03	K.100.Δ04	K.100.Δ05	K.100.Δ06	K.100.Δ07

Δ = nahradíte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 5 = černá, 8 = světlá

Genumedi® extrawide

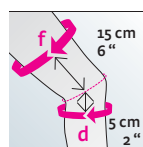

obvod "f" (cm)	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
obvod "d" (cm)	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
velikost	III	IV	V	VI	VII
číslo artiklu	K.101.Δ13	K.101.Δ14	K.101.Δ15	K.101.Δ16	K.101.Δ17

Δ = nahradíte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 8 = světlá

Genumedi® plus

Kolenní bandáž se silikonovou patelární pelotou a přidatnými popruhy

Indikace

- mírná nestabilita kolenního kloubu
- kloubní výpotky a otoky
- chronický, pooperační a poúrazový zánět
- osteoartritida a artritida
- syndrom patelofemorální bolesti

Mechanismus účinku

- masážní účinek kompresivní pleteniny a silikonové vložky zlepšuje krevní oběh a napomáhá vstřebávání hematomů a otoků
- bezešvá tvarovaná bandáž kolene zlepšuje propriocepci a svalovou podporu (stabilizace kolene)



Kód VZP:

04 - 0093987


Přednosti výrobku



Přidatné popruhy zajišťují stabilizaci a vyšší komfort nošení




Maximální odlehčení tlaku na česku díky speciálnímu vnitřnímu okraji silikonového kroužku

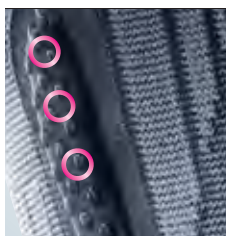

Protiskluzový systém s texturovaným silikonem v mediálním a laterálním směru

K dispozici též verze vyráběná na míru

stříbrná

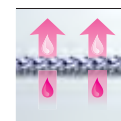


Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone

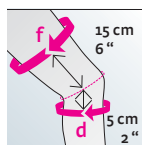

obvod "f" (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
obvod "d" (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
velikost	I	II	III	IV	V	VI	VII
číslo artiklu	K.110.211	K.110.212	K.110.213	K.110.214	K.110.215	K.110.216	K.110.217

Genumedi® PT

Kolenní bandáž podporující svalovou rovnováhu při lateralizaci čéšky

Indikace

- syndrom patelofemorální bolesti při těchto stavech:
 - hypermobilní čéška
 - lateralizace čéšky
 - svalová nerovnováha
 - patologický laterální pohyb čéšky
- pooperační léčba (stabilizace čéšky)

Mechanismus účinku

- pozitivní účinek na svalové struktury, které polohují čéšku, kompenzuje nerovnováhu
- snižuje napětí m. vastus lateralis
- aktivuje m. vastus medialis
- laterálně vyztužený silikonový kroužek šetrně polohuje čéšku ke spolehlivému pohybu ve femorálním žlábků
- proprioceptivní komprese zajišťuje spolehlivé polohování a stabilizaci kloubů



Kód VZP:

04 - 0140586

Přednosti výrobku



Uvolňuje a aktivuje
Přesně umístěné peloty s neurofyziologickými třecími body uvolňují a aktivují m. vastus lateralis a m. vastus medialis




Individuální přizpůsobení
Utahovací popruh lze podle potřeby uvolnit nebo utáhnout, a tím upravit tlak na m. vastus lateralis



Korekce sklonu čéšky
Silikonový kroužek kolem čéšky je laterálně vyztužený na podporu správného kladkového kloubního spojení. Sklon čéšky je korigován

stříbrná

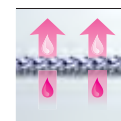


Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone

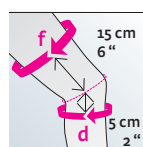

obvod "f" (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
obvod "d" (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
velikost	I	II	III	IV	V	VI	VII
číslo artiklu	K.14○.201	K.14○.202	K.14○.203	K.14○.204	K.14○.205	K.14○.206	K.14○.207

○ = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Klinická hodnocení potvrzují účinnost Genumedi® PT

Úloha nerovnováhy čtyřhlavého svalu ve vztahu k m. vastus medialis a m. vastus lateralis jako původce femoropatelní bolesti a patelní nestability je lékařsky prokázána. Výsledky klinických hodnocení navíc potvrzují, že použití Genumedi PT přináší statisticky významnou úlevu od bolesti.

Údaje dokládají, že selektivní uvolnění m. vastus lateralis (například injekcemi botulotoxinu) může pomoci posílit fázickou funkci m. vastus medialis a umožnit tak nápravu svalové nerovnováhy.**

Od prosince 2010 do dubna 2012 byla ve spolupráci se dvěma nezávislými zkoušejícími pracovišti ve Stuttgartu a Frankfurtu prováděna klinická hodnocení účinnosti kolenní bandáže Genumedi PT.

Spokojenost pacientů přesáhla 94 %.

Průzkumy u pacientů zjistily, že v 80 % případů došlo k výraznému snížení bolesti a v souvislosti s tím ke zlepšení mobility. Na konci hodnoceného období 94,4 % pacientů vyhodnotilo kolenní bandáž Genumedi PT jako užitečnou nebo extrémně užitečnou.

Skóre na stupnicích Kujala a VAS vykazují díky Genumedi PT výraznou úlevu od bolesti.

Při léčbě s použitím kolenní bandáže Genumedi PT byl mezi hodnocenými uživateli zaznamenán výrazný ústup bolesti:


- Skóre VAS pacientů pokleslo v průměru o 2 body.
- Na konci zkušební období bylo skóre Kujala v průměru 92 bodů, což znamená, že bolest pacientům jen zřídka bránila v pohybu.

* Travell, J. Simons, D. Handbuch der Muskel-Triggerpunkte (The Trigger Point Manual). Munich 2000

** British Journal of Sports Medicine 2011; 45: 640-645.

*** Herresthal, J. Gutachten Genumedi PT. Frankfurt 2012 (nepublikováno) Wagner, D. Gutachten Genumedi PT. Stuttgart 2012. (nepublikováno)


Genumedi® PT extrawide

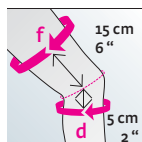

obvod "f" (cm)	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58	58 – 61
obvod "d" (cm)	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
velikost	III	IV	V	VI	VII
číslo artiklu	K.14○.213	K.14○.214	K.14○.215	K.14○.216	K.14○.217


○ = nahradte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Četnost úlevy od bolesti a zvýšení aktivity pacientů

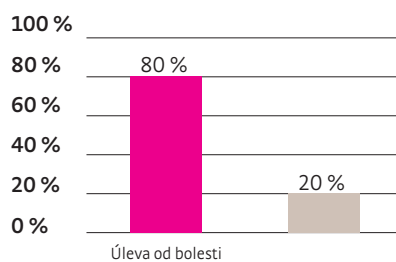


Výsledky z 1. zkoušejícího pracoviště***

Spokojenost pacientů

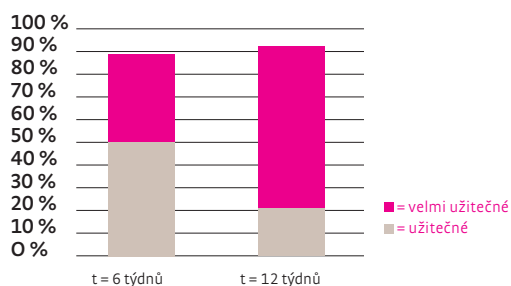


Výsledky z 2. zkoušejícího pracoviště***

Skóre VAS

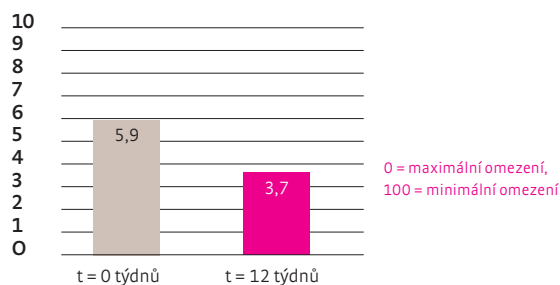

Výsledky z 1. zkoušejícího pracoviště***

Skóre Kujala

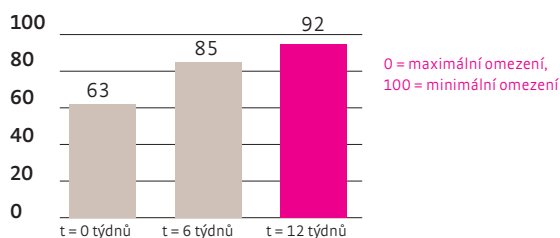

Výsledky z 2. zkoušejícího pracoviště***

Genumedi® pro

Ortéza k zajištění fyziologického pohybu kolenního kloubu

Indikace

- mírná až střední nestabilita kolenního kloubu
- osteoartritida kolene
- mírná poranění menisku

Mechanismus účinku

- masážní účinek integrované silikonové peloty
 - > zmírňuje otoky (edémy, hematomy)
- proprioceptivní komprese
 - > usměrňuje a stabilizuje klouby
- klouby easyglide věrně napodobují přirozený valivý a klouzavý pohyb kolenního kloubu
 - > zajišťují pohodlnou stabilizaci




Kód VZP: 04 - 0140587

Přednosti výrobku



Moderní klouby easyglide stabilizují a podporují přirozený valivý a klouzavý pohyb kolenního kloubu

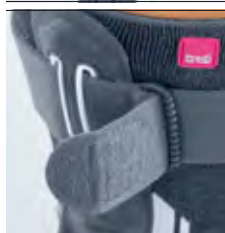

Kruhové stehění a podkolenní popruhy zajišťují bezpečné uchycení a zlepšují pohodlí při nošení




Integrované zapuštěné úchyty na horním okraji ortézy usnadňují nasazení



Silikonová úprava na zadní straně stehna pomáhá zabránit posunování

stříbrná

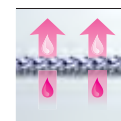


Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone

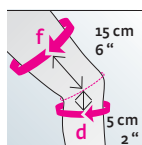

obvod "f" (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
obvod "d" (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
velikost	1	2	3	4	5	6	7
číslo artiklu	K.120.201	K.120.202	K.120.203	K.120.204	K.120.205	K.120.206	K.120.207

Stabimed® pro

Krátká funkční měkká ortéza

Indikace

- mírná až střední nestabilita kolenního kloubu
- chronické nestability
- lehčí poranění menisku (konzervativní léčba)

Mechanismus účinku

- postranní stabilizace kolenního kloubu
- prevence hyperextenze
- měkká ortéza s kompresivním a proprioceptivním účinkem

NOVÉ



Kód VZP:

04 - 0140304

šedá




Nasouvací varianta

Přednosti výrobku



Velmi pohodlné nošení díky odolné síťovině v zadní části

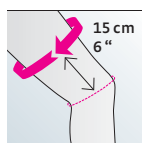

obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74	74 – 84
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
číslo artiklu	G.080.061	G.080.062	G.080.063	G.080.064	G.080.065	G.080.066	G.080.067

Stabimed®

Krátká funkční měkká ortéza s omezením flexe / extenze

Indikace

- mírná až střední nestabilita kolenního kloubu
- poranění menisku
- traumatické nebo degenerativní deformity kolenního kloubu
- ochrana v pozdějších fázích rehabilitace

Mechanismus účinku

- postranní stabilizace kolenního kloubu díky bočním výztuhám
- prevence hyperextenze a omezení rozsahu pohybu stavitelnými klouby physioglide
- stupně omezení extenze: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- stupně omezení flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- měkká ortéza s kompresivním a proprioceptivním účinkem

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.

NOVÉ



Kód VZP:

04 - 0078947


Přednosti výrobku



Velmi pohodlné nošení díky odolné síťovině v zadní části




Výměna klínů bez nářadí

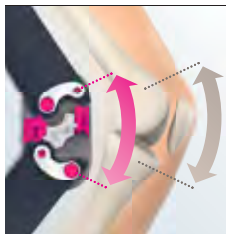


Kloub physioglide věrně napodobuje valivý / klouzavý pohyb kolenního kloubu a zaručuje, že ortéza dobře padne

Bezproblémové použití při kontaktních sportech

šedá

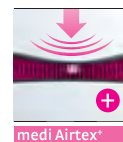

Navlékací / zábalová varianta

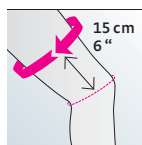

obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74	74 – 84
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
číslo artiklu	G.070.041	G.070.042	G.070.043	G.070.044	G.070.045	G.070.046	G.070.047

Collamed® / Collamed® long

Dlouhá nebo extra dlouhá funkční měkká
ortéza s omezením flexe / extenze

Indikace

- konzervativní / pooperační léčba ruptur zkrřížených vazů (samostatných nebo s průvodními zraněními)
- konzervativní / pooperační léčba ruptur postranních vazů s lézí menisku
- konzervativní léčba nestabilit (samostatných nebo s průvodními zraněními)


Mechanismus účinku

- prevence hyperextenze a omezení rozsahu pohybu stavitelnými klouby physioglide
- stupně omezení extenze:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- stupně omezení flexe:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- univerzální verze použitelná vlevo i vpravo
- velmi dobrá postranní stabilizace kolenního kloubu díky dlouhým bočním výztuhám
- měkká ortéza s kompresivním a proprioceptivním účinkem

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.

Collamed®

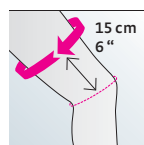

Collamed® long



obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74	74 – 84
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
číslo artiklu	G.060.141	G.060.142	G.060.143	G.060.144	G.060.145	G.060.146	G.060.147

obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.060.151	G.060.152	G.060.153	G.060.154	G.060.155	G.060.156

NOVÉ



Kód VZP:

04 - 0140305

šedá



medi Airtex®



Navlékací / zábalová
varianta

Přednosti výrobku




Výborně přiléhá díky
rozevírací konstrukci se
zapínáním na suchý zip



Velmi pohodlné nošení
díky síťovině v zadní
části



Výměna klínů bez nářadí

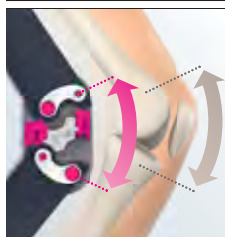

Kloub physioglide věrně
napodobuje valivý /
klouzavý pohyb
kolenního kloubu a
zaručuje, že ortéza dobře
padne

medi PT control

Měkká ortéza pro korekci pohybu česky s omezením flexe / extenze

Indikace

- syndrom patelofemorální bolesti
- patelární chondroplastika
- retropatelární osteoartrida
- pooperační a poúrazová podráždění
- nestabilita česky a kolene

Mechanismus účinku

- postranní stabilizace kolenního kloubu
- prevence hyperextenze a omezení rozsahu pohybu
- stupně omezení extenze: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- stupně omezení flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- korekce nesprávného laterálního pohybu česky
- měkká ortéza s kompresivním a proprioceptivním účinkem
- stabilizační opěra česky brání laterálnímu pohybu v celém rozsahu flexe a extenze

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.


NOVÉ



Kód VZP:

04 - 0140303

šedá

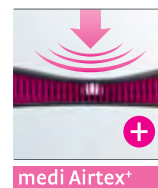

medi Airtex+

Přednosti výrobku



Výměna klínů bez nářadí

Klíny lze snadno a rychle vyměnit vestavěnými pinzetami; šrouby nejsou třeba




Výborně přiléhá díky rozvírací konstrukci se zapínáním na suchý zip




Korekce posunu česky

Díky individuálně nastavitelné stabilizační opěrné patelární pelotě a vzduchovému polštářku

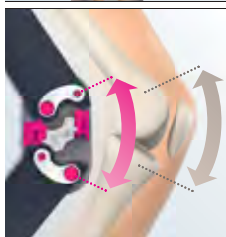

Kloub physioglide věrně napodobuje valivý / klouzavý pohyb kolenního kloubu a zaručuje, že ortéza dobře padne

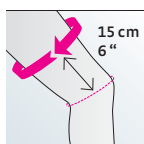

obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.14□.001	G.14□.002	G.14□.003	G.14□.004	G.14□.005	G.14□.006

□ = nahradte číslem pro variantu: 2= medi PT control, 3= medi PT control wrap, ○ = nahradte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Collamed® OA

Tříbodová měkká ortéza z materiálu Airtex ke korekci varu / valgu pro pacienty s osteoartritidou

Indikace


- konzervativní léčba mírné až středně těžké unilaterální mediální nebo laterální osteoartrity kolene
- trvalá dlouhodobá léčba při kontraindikaci chirurgického zákroku

Mechanismus účinku

- korekce laterálního nebo mediálního kloubního kompartmentu tříbodovou konstrukcí a nafukovací korekční kondylární pelotou
- úleva od bolesti odlehčením postiženého kloubního kompartmentu
- zmenšuje další dráždění kloubního pouzdra
- kompresivní a proprioceptivní měkká ortéza
- stupně omezení extenze: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- stupně omezení flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
- stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.

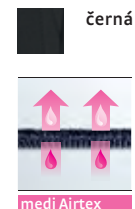


Navlékáč / zábalová varianta



Nasouváková varianta


Přednosti výrobku

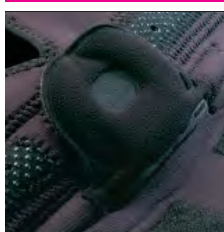

Nafukovací kondylární pelota



Systém popruhů

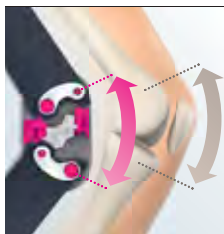


Kloub physioglide věrně napodobuje valivý / klouzavý pohyb kolenního kloubu a zaručuje, že ortéza dobře padne

Nafukovací kondylární pelota umožňuje individuálně nastavit varózní / valgózní úhel

Vyrobeno z materiálu Airtex, který je elastický, prodyšný a odvádí vlhkost

Bezproblémové použití při kontaktních sportech

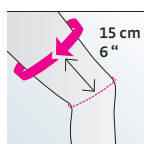

obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.16○.001	G.16○.002	G.16○.003	G.16○.004	G.16○.005	G.16○.006

○ = nahradte číslem pro orientaci: 5 = levý varus / pravý valgus, 6 = levý valgus / pravý varus

M.4[®] AGR

Funkční ortéza pro genu recurvatum

Indikace

- genu recurvatum

Mechanismus účinku

- systém postupného tlumení snižuje dopad na povrch kolenního kloubu ve fázi koncové extenze při chůzi

Poznámka


Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



stříbrná


Kód VZP: 04 - 0140300

Přednosti výrobku

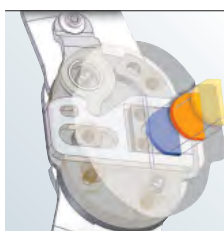

Vložené rozpěrky zajišťují systém postupného tlumení

- modrá: nejnižší hustota
- oranžová: střední hustota
- žlutá / průhledná: maximální hustota

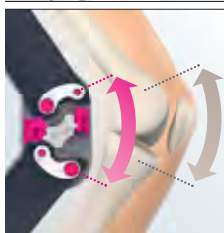

Kloub physioglide věrně napodobuje valivý / kluzavý pohyb kolenního kloubu a zaručuje, že ortéza dobře padne




Předdefinování stupně tlumení

Příslušenství




Přední opora holenní kosti

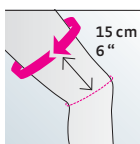


obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.051.001	G.051.002	G.051.003	G.051.004	G.051.005	G.051.006

○ = nahradte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

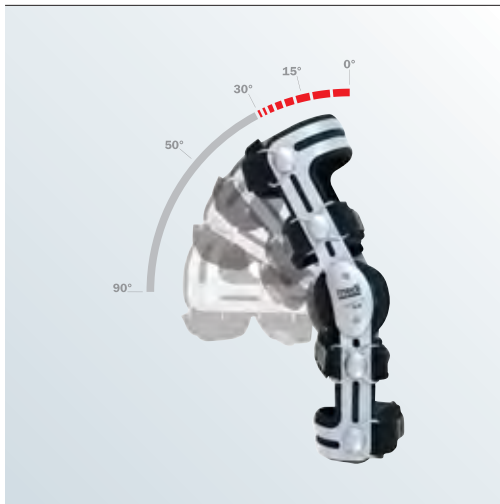

Progresivní tlumící účinek až po plnou extenzi

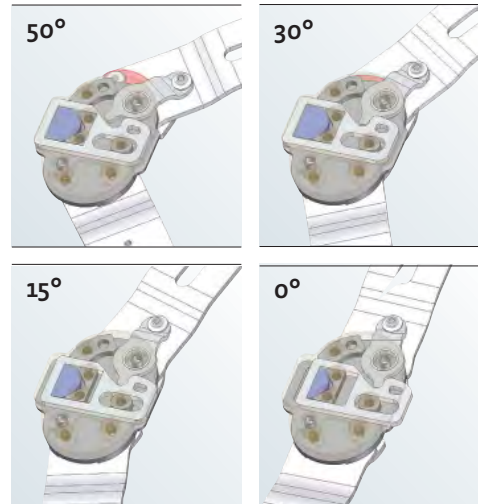

Předdefinování stupně tlumení

Studie a odkazy

- Kontrola genu recurvatum kombinací použití „švédské kolenní klece“ a kotníkově-chodidlové ortézy – Isakov E., Mizrahi J., Onna I., Susak Z. Department of Orthopaedic Rehabilitation, Loewenstein Hospital, Ra'anana, Israel. - Disabil Rehabil. 1992 Oct-Dec; 14(4):187,91
- Genu recurvatum způsobené částečným růstovým deficitem proximálního konce tibie: simultánní korekce a prolongace s růstovým rozptylem. Případová studie – Olerud C., Danckwardt - Lilliestrom G., Olerud S. - Arch Orthop Trauma Surg. 1986; 106(1):64-8

M.4s[®]

M.4s[®] comfort

Funkční rigidní ortéza s kloubem
physioglide k omezení flexe / extenze

Indikace


- konzervativní / pooperační léčba ruptur zkřížených vazů (samostatných nebo s průvodními zraněními)
- konzervativní / pooperační léčba ruptur postranních vazů s lézí menisku
- konzervativní léčba nestability (samostatné nebo kombinované)

Mechanismus účinku

- optimální stabilizace díky čtyřbodové konstrukci
- omezení extenze / flexe chrání před pohyby, které by mohly poškodit kloub
- stupně omezení extenze:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- stupně omezení flexe:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
(M.4s: 120°)
- stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.

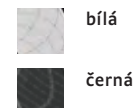

Přednosti výrobku




Výměna klínů bez nářadí

Klíny lze snadno a rychle vyměnit vestavěnými pinzetami; šrouby nejsou třeba




Oddělené polštářky na pásu č. 4

Oddělené polštářky na pásu brání nežádoucímu tlaku na steh

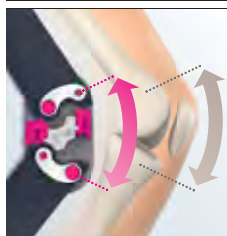

Kloub physioglide věrně napodobuje valivý / klouzavý pohyb kolenního kloubu a zaručuje, že ortéza dobře padne


Příslušenství

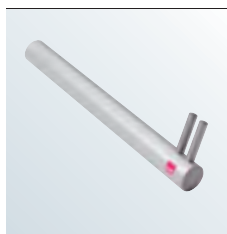

Číslo artiklu: GE00009

Ohýbací nástroj pro individuální nastavení rigidních dlah

Na vyžádání se dodává návlek pod ortézu

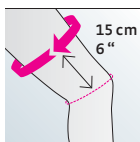

M.4s® comfort



obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.07△.001	G.07△.002	G.07△.003	G.07△.004	G.07△.005	G.07△.006

△ = nahradíte číslem pro barvu: 1 = černá, 2 = bílá ○ = nahradíte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

M.4s® ACL



obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.030.○01	G.030.○02	G.030.○03	G.030.○04	G.030.○05	G.030.○06

○ = nahradíte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Kód VZP: 04 - 0093654

M.4s® PCL



obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.031.○01	G.031.○02	G.031.○03	G.031.○04	G.031.○05	G.031.○06

○ = nahradíte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Kód VZP: 04 - 0093654

M.4s® short



obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.032.○01	G.032.○02	G.032.○03	G.032.○04	G.032.○05	G.032.○06

○ = nahradíte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Kód VZP: 04 - 0093654

M.4 X-lock®

Čtyřbodová rigidní ortéza s omezením extenze / flexe a blokadí extenze

Indikace

- sutury menisku – pooperační
- ruptury extenzorových šlach kolene (patelární šlacha, šlacha čtyřhlavého svalu) – pooperační
- operace chrupavky v oblasti čéšky a trochleárního žlábků
- restriktivní operace kolena (např. rekonstrukce MPFL) nebo dislokace čéšky
- sutury menisku s poraněním vazů (např. ruptury zkřížených vazů)
- konzervativní léčba dislokace čéšky

Mechanismus účinku

- spolehlivé uzamčení při plné extenzi, následně lze při extenzi osově zatížit
- tlaková komprese podporuje stabilitu sutury
- díky snadné konverzi při volném pohybu lze provádět počáteční funkční cvičení, pokud ortéza není zatížena
- prevence svalové atrofie
- stupně omezení extenze: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- stupně omezení flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Kód VZP:

04 - 0140589

Přednosti výrobku



Výměna klínů bez nářadí

Klín lze snadno a rychle vyměnit vestavěnými pinzetami; šrouby nejsou třeba




Vodovzdorné pěnové polstrování

Ortézu lze nosit i při sprchování




Na chirurgickou ránu není vyvíjen žádný tlak.

Pacient si může podle individuálních potřeb nastavit dva samostatné polštářky. Zamezí se tím tlaku na chirurgickou ránu

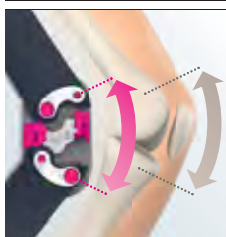

Kloub physioglyde věrně napodobuje valivý / klouzavý pohyb kolenního kloubu a zaručuje, že ortéza dobře padne


černá

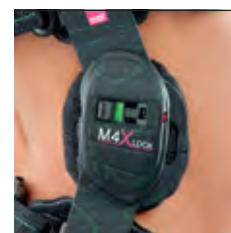

zelená: odemčený režim, ohnutá noha není zatížena



červená: zamčený režim při plné extenzi

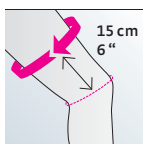

obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.061.001	G.061.002	G.061.003	G.061.004	G.061.005	G.061.006

O = nahradíte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

M.3s OA

Funkční kolenní ortéza s jedním kloubem pro úlevu od jednokompartmentové osteoartritidy kolene

Indikace

- konzervativní léčba výrazné unilaterální mediální nebo laterální osteoartritidy a artritidy kolene
- trvalá léčba při kontraindikaci chirurgického zákroku
- dočasná léčba do rozhodnutí o možném chirurgickém řešení (např. korekční osteotomie nebo náhrada kolenního kloubu)
- odlehčení po operacích mediálních nebo laterálních zlomenin hlavičky kosti holenní

Mechanismus účinku

- korekce mediálního nebo laterálního kloubního kompartmentu tříbodovou konstrukcí
- úleva od bolesti odlehčením postižené strany kloubu
- zmírňuje další dráždění kloubního pouzdra / synovitidu
- kloub s plochým profilem umožňuje individuální nastavení varózních a valgózních úhlů; v průběhu léčby je lze upravovat podle postupu hojení
- kloub ortézy proximálně ke kolennímu kloubu umožňuje přesnou korekci kolene
- polycentrický kloub
- omezení extenze: 0°, 10°

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



šedá / grafit

Přednosti výrobku



100% hliníkový rám
Pevná, lehká konstrukce rámu a kloubu s plochým profilem




Konstrukce s elastickým mediálním popruhem na úrovni stehna



Součástí dodávky je imbusový klíč pro individuální seřízení

Číslované popruhy zajišťují jednoduché zapínání ve správném pořadí

Kondylární vzduchové peloty s protiskluzovým systémem

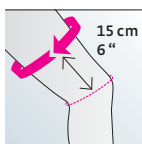

obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	5.5F□.○01	5.5F□.○02	5.5F□.○03	5.5F□.○04	5.5F□.○05	5.5F□.○06

□ = nahradte číslem pro variantu: 4 = varus, 5 = valgus ○ = nahradte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

M.4[®]s OA

šedá/grafit

Čtyřbodová kolenní ortéza pro odlehčení varózního nebo valgózního tlaku

Indikace

- Konzervativní léčba těchto stavů:
 - těžká mediální nebo laterální gonartróza (alespoň 3. stupně) v kombinaci s nestabilitou vazů
 - silné přetížení mediálního nebo laterálního kompartmentu
 - jednokompartmentové odlehčení před vysokou osteotomií tibie (zkouška ortézou)
 - úleva od silného, bolestivého otoku kosti (zhmoždění kosti)
 - úleva od bolestivých únavových zlomenin
- Pooperační léčba těchto stavů:
 - operace chrupavky
 - chondroplastika
 - refixace menisku
 - reпозиční osteotomie s nutností pooperačního odlehčení tlaku na mediální nebo laterální kompartment

Mechanismus účinku


- ochrana, stabilizace, úleva od bolesti a obnovení mobility
- odlehčení tlaku na mediální nebo laterální kompartment kloubu tříbodovou konstrukcí, která koriguje postižený kompartment do varózního nebo valgózního postavení
- stabilizace kolenního kloubu pomocí čtyřbodové konstrukce k vyrovnání nestability kolena, která způsobuje osteoartritidu
- stupně omezení extenze: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- stupně omezení flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°



Kód VZP:

04 - 0140301

Přednosti výrobku

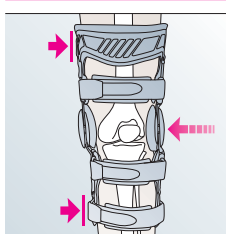

Tříbodový systém pro zaručenou ochranu



100% hliníkový rám




K dispozici též v krátké verzi

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.

M.4s[®] OA

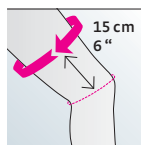

obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.02□.001	G.02□.002	G.02□.003	G.02□.004	G.02□.005	G.02□.006

□ = nahradte číslem pro variantu: 7 = varus, 8 = valgus ○ = nahradte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

M.4s[®] OA short





obvod stehna (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
číslo artiklu	G.03□.001	G.03□.002	G.03□.003	G.03□.004	G.03□.005	G.03□.006

□ = nahradte číslem pro variantu: 4 = varus, 5 = valgus ○ = nahradte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Správná volba ortézy

M.4s OA varus nebo valgus?

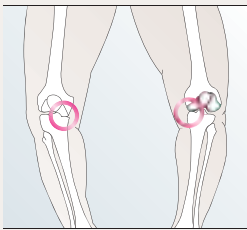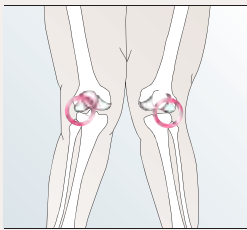Deformita	Varózní deformita (nohy do O)	Valgózní deformita (nohy do X)
		
Postižená strana	mediální	laterální
Léčba	mediální odlehčení	laterální odlehčení
Stavitelný kloub pro varus / valgus	laterální	mediální
Směr aplikované síly	laterálně mediální	mediálně laterální
Ortéza	M.4s OA varus	M.4s OA valgus


Studie



Klinické a analytické vyšetření chůze s ortézou s valgózním tlakem během terapie degenerativního onemocnění mediálního kolene.

PD Dr. med. R. Müller-Rath et al.

Další informace získáte na adrese m.wirsieg@medi.de – uveďte klíčové slovo: **Study 97A33**

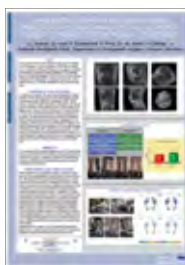

Případová studie: Femorální a tibiální tlaková reakce u rekreačních sportovců. Existuje zlatý standard pro lékařskou léčbu?

Dr. med. P. Schäferhoff et al.

číslo článku **97E14**



Použití ortézy kolena s valgózním tlakem u kolena s varózní deformitou za účelem ověření „efektu odlehčení“ následné valgózní vysoké tibiální osteotomie.

Dr. med. P. Minzlaff et al.

číslo článku **31108**

medi Classic

Ortéza pro imobilizaci kolene na 0° nebo 20°

Indikace

- pooperační imobilizace
- předoperační bolestivé stavy
- stav po dislokaci čéšky
- stav po poranění vazů

Mechanismus účinku

- imobilizace kolene na 0° nebo 20°



Kód VZP:

04 - 0140590

modrá



medi Kidz –
k dispozici též v
dětské verzi


Přednosti výrobku

Rychlé nastavení podle individuálních potřeb daných obvodem nohy

Odstranitelné mediální, laterální a posteriorní stabilizační výztuhy

Pohodlný froté materiál, který lze prát a je šetrný vůči pokožce

K dispozici dvě verze: 0° nebo 20°

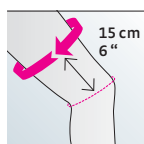

délka (cm)	40	50	60	40	50	60
varianta	0°			20°		
číslo artiklu	5.650.312	5.650.313	5.650.314	5.650.322	5.650.323	5.650.324

medi Jeans

Ortéza pro imobilizaci kolene na 0° nebo 30°

Indikace

- pooperační imobilizace
- předoperační bolestivé stavy
- stav po dislokaci čéšky
- stav po poranění vazů

Mechanismus účinku

- imobilizace kolene na 0° nebo 30°




modrá

Přednosti výrobku

Rychlé nastavení podle individuálních potřeb daných obvodem nohy

Odstranitelné mediální, laterální a posteriorní stabilizační výztuhy

Pohodlný froté materiál, který lze prát a je šetrný vůči pokožce

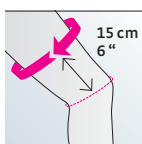

obvod stehna (cm)	37 – 46	47 – 56	57 – 66
velikost	S	M	L
číslo artiklu	5.65□.0○2	5.65□.0○3	5.65□.0○4

□ = nahrad'te číslem pro variantu: 1 = rovná 0°, 3 = zahnutá 30°
○ = nahrad'te obvodem stehna: 5 = 50 cm, 6 = 60 cm

medi PTS


Zadní opora kosti holenní, imobilizační kolenní bandáž

Indikace

- konzervativní léčba čerstvé ruptury zadního zkříženého vazy a chronické nestability zadního zkříženého vazy
- pooperační imobilizace po rekonstrukci zadního zkříženého vazy
- rozsáhlý deficit kvůli kontraktuře posteriorních vláken pouzdra
- dočasná imobilizace po implantaci endoprotézy kolenního kloubu
- patelofemorální bolest nereagující na léčbu
- akutní bolest předního kolene

Mechanismus účinku

- lýtková pelota uvádí lýtko do polohy anteriorně vůči stehnu
- zmírnění napětí zadního zkříženého vazy a odlehčení tlaku na patelofemorální kloub
- imobilizace v poloze 0°

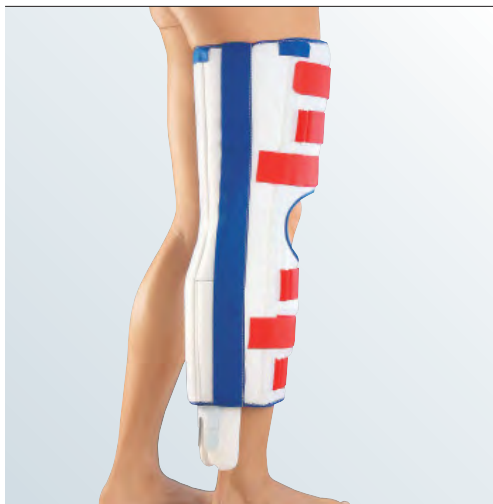

bílá

Přednosti výrobku



Zmírnění patelofemorální bolesti díky individuálnímu polohování lýtkové peloty

Rychlé nastavení podle individuálních potřeb daných obvodem nohy

Individuální úprava délky lýtkové peloty

Odstranitelné mediální, laterální a posteriorní stabilizační výztuhy

Pohodlný materiál, který lze prát a je šetrný vůči pokožce

délka (cm)	45	55	60	65
číslo artiklu	5.650.222	5.650.223	5.650.132	5.650.224

medi ROM / medi ROM cool

Univerzální kolenní dlahy s omezením flexe / extenze a možností imobilizace

Indikace

- pooperační imobilizace
- imobilizace po zranění kolene a pozdější mobilizace
- bezpečná stabilizace poraněných nebo operovaných postranních nebo zkřížených vazů

Mechanismus účinku

- postranní stabilizace kolenního kloubu
- pooperační imobilizace
- řízená mobilizace
- omezení v krocích o 10° až 15°
- flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- extenze: 0°, 10°, 20°, 30°
- imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



medi ROM cool

Přednosti výrobku




Nový patentovaný kloub quickset

Upevňovací popruhy, které se snadno a pohodlně zavírají „na kliknutí“

Upravitelné polstrování šetrné vůči pokožce

Příslušenství

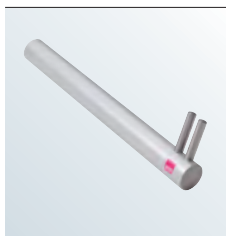

Číslo artiklu: GE00009
Ohýbací nástroj pro individuální nastavení rigidních dlah

délka (cm)	57	63
velikost	krátká	dlouhá
číslo artiklu medi ROM	G.180.029	G.180.021
číslo artiklu medi ROM cool	G.180.039	G.180.049







Hlezno

medi elastic ankle support 501

Obousměrně elastická, středně kompresivní hlezenní bandáž s vytvarovanou patou

Indikace

- zánět nebo namožení hlezna
- namožení svalů
- zhmožděnin
- profylaktické a terapeutické použití při sportu

Mechanismus účinku

- ulevuje podrážděnému kloubu a zlepšuje průtok krve do okolních měkkých tkání stálou kompresí a masáží při pohybu pacienta



Kód VZP:

04 - 0093651

světlá



Přednosti výrobku

Vyrobena z lehkého, prodyšného materiálu, který se pohodlně nosí, a tím zlepšuje dodržování léčby pacientem a terapeutické výsledky

Kompresivita 2. třídy

Usnadňuje pohyb kloubu



obvod hlezna (cm)	17 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
velikost	I	II	III	IV	V	VI
číslo artiklu	3.270.011	3.270.012	3.270.013	3.270.014	3.270.015	3.270.016

Elastická hlezenní bandáž medi 501 se také vyrábí na míru z kvalitního materiálu mediven 550

Achimed

Bandáž Achillovy šlachy s integrovanou anatomicky tvarovanou silikonovou pelotou

Indikace

- akutní a chronické záněty Achillovy šlachy
- poúrazový a pooperační zánět
- achillodynie
- burzitida Achillovy šlachy

Mechanismus účinku

- masážní účinek kompresivního materiálu a silikonové vložky podporuje hojení
- měkké ochranné polstrování na Achillově šlaše
- volitelně lze vkládat patní klíny, které omezují bolestivé napětí Achillovy šlachy



Kód VZP:

04 - 0078942


Příslušenství




Přídavné patní klíny omezují napětí Achillovy šlachy (nosí se v obou botách zároveň, aby se vyrovnala délka dolních končetin)



Navlékací pomůcka nasazovací ponožka se dodává s každou bandáží

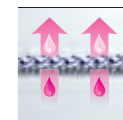

Clima Comfort

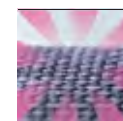

Clima Fresh



Comfort Zone



obvod hlezna (cm)	17 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
velikost	I	II	III	IV	V	VI
číslo artiklu	K.020.Δ01	K.020.Δ02	K.020.Δ03	K.020.Δ04	K.020.Δ05	K.020.Δ06

Δ = nahradte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 5 = černá, 8 = světlá

Levamed

Hlezenní bandáž se silikonovými pelotami

Indikace

- mírná nestabilita hlezenního kloubu
- fotbalový kotník, podvrtnutí
- kloubní výpotky a otoky způsobené artritidou a osteoartritidou
- chronický, pooperační a poúrazový zánět


Mechanismus účinku

- masážní účinek kompresivního materiálu a silikonové vložky podporuje cirkulaci, a tím napomáhá rychlé resorpci podlitin a otoků
- bandáž zlepšuje propriocepci a podporuje svalstvo (stabilizace hlezna)



Kód VZP: 04 - 0078941

Přednosti výrobku


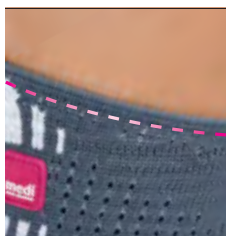


Díky inovativnímu úpletu horní okraj absolutně netlačí a dokonale padne na libovolnou dolní končetinu

Příslušenství



Navlékací pomůcka nasazovací ponožka se dodává s každou bandáží

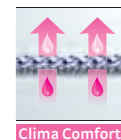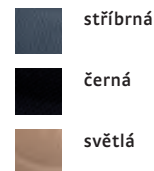

Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone



medi Kidz – ve velikostech I a II vhodné též pro děti



obvod hlezna (cm)	17 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
velikost	I	II	III	IV	V	VI
číslo artiklu	K.010.Δ01	K.010.Δ02	K.010.Δ03	K.010.Δ04	K.010.Δ05	K.010.Δ06

Δ = nahradte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 5 = černá, 8 = světlá

Levamed active

Hlezenní bandáž se stabilizační soustavou popruhů

Indikace

- chronická nestabilita vazů s opakovanými supinačními úrazy (stočení nohy)
- podvrtnutí kloubu s distenzí kloubního pouzdra
- druhá fáze léčby poranění deltového vazu
- následná léčba zlomenin nevyžadujících sádrovou fixaci
- akutní nebo chronické poúrazové nebo pooperační podráždění hlezenního a subtalárního kloubu
- konzervativní léčba poranění syndesmózy nevyžadujících chirurgický zákrok

Mechanismus účinku

- individuálně nastavitelná a odstranitelná soustava popruhů s elastickými a neelastickými sekcemi
- dodatečná fixační a stabilizační ochrana proti stočení nohy (supinace)
- masážní účinek integrovaných silikonových pelot
- zmírnění otoků (edémy, hematomy)
- proprioceptivní komprese
- polohování a stabilizace kloubů



Kód VZP: 04 - 0140591

Přednosti výrobku




Individuálně nastavitelná a odstranitelná soustava popruhů s elastickými a neelastickými sekcemi

Příslušenství




Navlékácká pomůcka nasazovací ponožka se dodává s každou bandáží. Mnohem jednodušší nasazení na zpotené nohy

černá

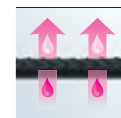

Clima Comfort

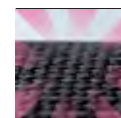

Clima Fresh



Comfort Zone



obvod hlezna (cm)	17 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
velikost	I	II	III	IV	V	VI
číslo artiklu	K.011.5○1	K.011.5○2	K.011.5○3	K.011.5○4	K.011.5○5	K.011.5○6

○ = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Levamed stabili-tri

Modulární ortéza s trojím účinkem k funkční léčbě poranění hlezna

Indikace:

- podvrtnutí hlezna (2. až 3. stupeň)
- chronická nestabilita hlezenního a dolního zánártního kloubu
- pooperační léčba po operaci vazivového aparátu hlezenního kloubu

Mechanismus účinku:


- modulární konstrukce na podporu funkční léčby
- adaptabilní na tři fáze léčby – pro bezpečnou a spolehlivou léčbu a mobilizaci pacienta
- jazyk pro fixaci hlezenní kosti omezuje dopředný posun hlezenní kosti
- mediální stabilizační prvek poskytuje oporu a zmírňuje napětí na boční straně nohy
- stabilizační popruh polohuje nohu do mírné pronace a podporuje hojení
- kompresivní pletenina zlepšuje propriocepci a podporuje rychlejší vstřebávání hematomů a otoků



Kód VZP:

04 - 0140592

Přednosti výrobku

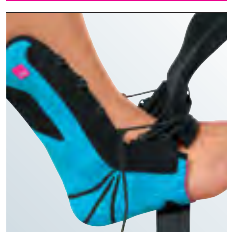

Jazyk lze doširoka rozevřít k pohodlnému nazouvání a vyzouvání




Jazyk pro fixaci hlezenní kosti s křížovým šněrováním umožňuje přizpůsobit tlak individuálním požadavkům a snadno se s ním pracuje – tkaničky rychle a spolehlivě „zakliknou“ do háčků



Mediální poloha stabilizačního prvku chrání poraněnou laterální stranu nohy a zajišťuje vysoký komfort nošení

modrá /
azurová

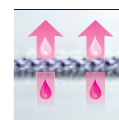

Clima Comfort



Clima Fresh



DESIGN
AWARD
2015



obvod hlezna (cm)	17 – 21	21 – 24	24 – 27	27 – 30
velikost	I	II	III	IV
číslo artiklu	K.012.3○1	K.012.3○2	K.012.3○3	K.012.3○4

○ = nahradte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

M.step®

Funkční hlezenní ortéza s pěnovogelovým polstrováním

Indikace

- konzervativní a pooperační léčba poranění fibulárního vazy hlezna (2. až 3. stupně)
- chronické nestability hlezna
- stavy po podvrtnutí

Mechanismus účinku

- rigidní skořepiny zajišťují velmi dobrou stabilizaci pro pronační a supinační pohyby
- pěnovogelové polstrování se dokonale přizpůsobuje různým anatomickým poměrům a zajišťuje jednotnou kompresi



Kód VZP:

04 - 0140299

černá



medi Kidz –
k dispozici též v
dětské verzi

Přednosti výrobku



Pouze dva popruhy, upínání je proto rychlé a bezpečné; popruhy lze ze skořepin odstranit individuálně upravit



Vyrábí se ve třech délkách: standardní (dlouhá verze), sportovní (krátká verze), pediatrická (dětská verze)



Velmi lehké pěnovogelové polstrování s měkkým povrchem šetrným vůči pokožce

varianta	standardní	sportovní	dětská
číslo artiklu	G.090.009	G.091.009	G.092.009

medi ROM Walker

Chodící ortéza s omezením rozsahu pohybu

Indikace

- stavy po operacích vazů, měkkých tkání a šlach
- pooperační a konzervativní léčba zlomenin lýtkové kosti
- dislokované zlomeniny hlezenního kloubu
- konzervativní léčba poranění přednoží, nártu a zánártí
- stavy po refixaci vazů a dislokaci peroneální šlachy
- chronická nestabilita vazů
- následná léčba po zlomeninách kosti hlezenní, kosti patní a vnitřního kotníku
- včasná funkční terapie po konzervativní nebo chirurgické léčbě ruptury Achillovy šlachy

Mechanismus účinku

- volitelný fixní úhel kloubu nebo částečná vůle; umožňuje včasnou funkční mobilizaci
- plantární flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- dorzální flexe: 20°, 10°, 0°
- imobilizace při každém nastavení úhlu v krocích po 10°
- fyziologická chůze díky speciální konstrukci podešve

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



tmavě
modrá

Přednosti výrobku



Patentovaný QuickSet
kloub

velikost boty EU	32 – 38	38 – 43	43 – 48
velikost boty UK	1 – 5	5 – 9	9 – 13
velikost	S	M	L
číslo artiklu	G.160.002	G.160.003	G.160.004

medi Walker boot

Fixní chodící ortéza

Indikace

- stavy po operacích vazů, měkkých tkání a šlach
- pooperační a konzervativní léčba zlomenin lýtkové kosti
- dislokované zlomeniny hlezenního kloubu
- konzervativní léčba poranění přednoží, nártu a zánártí
- stavy po refixaci vazů a dislokaci peroneální šlachy
- chronická nestabilita vazů
- následná léčba po zlomeninách kosti hlezenní, kosti patní a vnitřního kotníku
- včasná funkční terapie po konzervativní nebo chirurgické léčbě ruptury Achillovy šlachy

Mechanismus účinku

- volitelný fixní úhel kloubu nebo částečná vůle; umožňuje včasnou funkční mobilizaci
- plantární flexe: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- dorzální flexe: 20°, 10°, 0°
- imobilizace při každém nastavení úhlu v krocích po 10°
- fyziologická chůze díky speciální konstrukci podešve



Přednosti výrobku

Bezproblémová kontrola rány a osobní hygiena díky snadnému nasazování a sundávání

tmavě
modrá



medi Kidz –
k dispozici též v
dětské verzi

velikost boty EU	32 – 38	38 – 43	43 – 48
velikost boty UK	1 – 5	5 – 9	9 – 13
velikost	S	M	L
číslo artiklu	G.190.002	G.190.003	G.190.004





medi Kidz

medi Collar soft Kidz

Pohodlný krční límec

Indikace

- ztuhlost a bolest krku a ramen
- osteoartritida krku
- svalové křeče se zkroucením krku (tortikolis)
- poranění krku z prudké extenze a flexe (whiplash)
- nestabilita krku
- revmatická bolest

Mechanismus účinku

- podporuje a stabilizuje krk
- léčbu podporuje též zateplení krku



obvod krk (cm)	18 – 22 (výška 5 cm)	22 – 28 (výška 6 cm)	28 – 33 (výška 7 cm)
velikost	1	2	3
číslo artiklu	R.222.011	R.222.012	R.222.013

medi Clavicle support Kidz

Klavikulární bandáž

Indikace

- pouřazové a pooperační zlomeniny
- vykloubení akromioklavikulárního kloubu

Kontraindikace

- komprese dýchacích cest
- komprese neurovaskulárního svazku

Mechanismus účinku

- bezpečná a spolehlivá fixace ramenního pletence
- podporuje správný srůst zlomené kosti tím, že rameno udržuje v zadní poloze

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Věk (let)	od 3 do 8	od 8 do 12
velikost	1	2
číslo artiklu	R.333.011	R.333.012

medi Armschlinge Kidz

Imobilizační ramenní ortéza

Indikace

- imobilizace po chirurgickém zákroku
- vykloubení ramene

Mechanismus účinku

- zmírňuje napětí v oblasti ramene, paže a lokte
- přizpůsobuje rameno a znehybňuje paži

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Poznámka

Děti přibližně od věku 12 let mohou používat také medi Armschlinge (viz str. 31)

Věk (let)	od 3 do 8	od 8 do 12
velikost	I	II
číslo artiklu	R.040.GK1	R.040.GK2

medi Shoulder sling Kidz

Imobilizační ortéza ramenního kloubu

Indikace

- kontuze a podvrtnutí ramene
- vykloubení ramene
- léze rotátorové manžety
- stabilní subkapitální zlomeniny pažní kosti
- zlomeniny lopatky

Mechanismus účinku

- stabilní fixace ramene a paže
- další stabilizace hrudním popruhem

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Věk (let)	od 3 do 8	od 8 do 12
velikost	1	2
číslo artiklu	R.030.G29	R.030.G39

medi Epico ROM s Kidz

Loketní mobilizační ortéza

Indikace


- konzervativní léčba vykloubení lokte bez druhotných zranění
- ortopedická léčba zlomenin mediálního nebo laterálního epikondylu
- pooperační léčba po implantaci endoprotézy
- funkční následná léčba stabilních zlomenin distálního humeru
- dočasná imobilizace po artrolýze lokte

Mechanismus účinku

- ortéza pro individualizovanou funkční léčbu
- znehybňuje loketní kloub fixací paže a předloktí
- omezení extenze / flexe se nastavuje v 10° krocích (od 0° do 120°)

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.

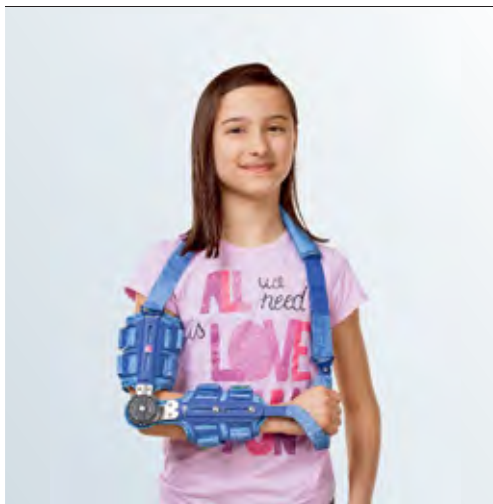

Kód VZP: 04 - 0140284

délka horní končetiny (cm)	24 – 29
velikost	S
číslo artiklu	R.031.0K9

0 = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá



Poznámka

Pokud délka horní končetiny přesahuje 29 cm, lze předepsat Epico ROMs (viz str. 44)

Manumed Kidz

Zápěstní bandáž se stabilizační dlahou

Indikace

- podvrtnutí / natažení zápěstí
- pooperační imobilizace zápěstí
- zánět nebo jiná onemocnění šlach zápěstí
- zánětlivé fáze revmatických chorob

Mechanismus účinku

- imobilizace a stabilizace zápěstí



Kód VZP: 04 - 0078949

obvod zápěstí (cm)	10 – 11	11 – 13	13 – 14	15
velikost	1	2	3	4
číslo artiklu	R.110.051	R.110.052	R.110.053	R.110.054

0 = nahrad'te číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá



Poznámka

Pokud obvod zápěstí přesahuje 15 cm, lze předepsat Manumed (viz str. 50)

medi Classic Kidz

Ortéza pro imobilizaci kolene

Indikace

- pooperační imobilizace
- předoperační bolestivé stavy
- stav po luxaci česky

Mechanismus účinku

- imobilizace kolenního kloubu

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Kód VZP: 04 - 0140590



Poznámka

Pokud délka ortézy přesahuje 40 cm, lze předepsat medi Classic (viz strana 84)

délka ortézy (cm)	21	26	31	40
velikost	1	2	3	4
číslo artiklu	5.650.0K1	5.650.0K2	5.650.0K3	5.650.0K4

medi ROM Kidz

Univerzální kolenní ortéza s omezením flexe / extenze a možností imobilizace

Indikace

- po operaci kolene
- imobilizace po zranění kolene a následná mobilizace
- bezpečná a spolehlivá stabilizace poraněných nebo operovaných postranních vazů

Mechanismus účinku

- postranní stabilizace kolenního kloubu
- pooperační imobilizace
- řízená mobilizace

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Kód VZP: 04 - 0093819

délka ortézy (cm)	25	35
velikost	krátká	dlouhá
číslo artiklu	G.180.0K1	G.180.0K2

M.step® Kidz

Hlezenní stabilizační ortéza

Indikace

- konzervativní a pooperační léčba zranění vaziva hlezenního kloubu (stupně II a III)
- stavy po podvrtnutí
- chronická nestabilita hlezenního kloubu

Mechanismus účinku

- rigidní půlená skořepina stabilizuje pronační a supinační pohyby
- samopřizpůsobivá výplň s integrovanými pěnovými vložkami ke snížení tlaku

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Kód VZP: 04 - 0140299

velikost univerzální

číslo artiklu G.092.009

medi Walker boot Kidz

Fixní chodící ortéza

Indikace

- pooperační léčba (ruptura Achillovy šlachy, poranění vazů, měkkých tkání a šlach, zlomenina lýtkové kosti)
- konzervativní léčba (přednoží, nárt a zánártí, Achillova šlacha, zlomenina lýtkové kosti)

Mechanismus účinku

- fixuje hlezenní kloub v úhlu 90°
- zaoblená podrážka umožňuje fyziologickou chůzi
- snadná kontrola rány a osobní hygiena

Poznámka

Produkt je určen k použití výhradně po odborném nasazení a nastavení.



Poznámka

Od velikosti obuvi 32 lze předepsat chodící ortézu medi Walker (viz strana 99)

Velikost boty (EU) 18 – 22 23 – 25 26 – 28 29 – 32

velikost S M L XL

číslo artiklu G.190.0K1 G.190.0K2 G.190.0K3 G.190.0K4


měkké bandáže medi

vhodné též pro děti



Genumedi (str. 66)

ve velikostech I a II vhodné též pro děti

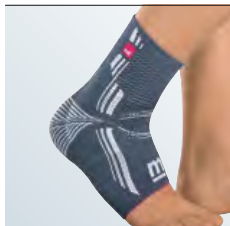

Levamed (str. 94)

ve velikostech I a II vhodné též pro děti



Manumed active (str. 48)

ve velikostech I a II vhodné též pro děti



medi GmbH & Co KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth
Germany
P +49 921. 912-0
F +49 921. 912-783
export@medi.de
www.medi.de

medi Austria GmbH
Adamgasse 16 / 7
6020 Innsbruck
Austria
P +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at

medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13 / 1
3582 Koersel
Belgium
P +32 11 24 25 60
F +32 11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be

medi Brasil
Rua Neusa 216
Diadema-Sao Paulo
Cep 09941-640
Brazil
P +55 11 3201 1188
F +55 11 3201 1185
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com

medi Danmark
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Danmark
P +45 46 55 75 69
F +45 70 25 56 20
kundenservice@sw.dk
www.medidanmark.dk

medi Bayreuth España SL
C / Canigó 2-6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
P +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Trembley en France
Cedex, France
P +33 1 48 61. 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
P +36 1371 0090
F +36 1371 0091
info@medi-hungary.hu
www.medi-hungary.hu

medi Italia s.r.l.
Via Guido Rossa 28
40033 Casalecchio di Reno-Bologna
P +0039516 13 24 84
F +0039516 13 29 56
E-Mail: info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Medical Support Sdn Bhd
medi representative office Asia
Unit No. B-2-19, Block B, No.2,
Jalan PJU 1A / 7A
Oasis Ara Damansara, PJU 1A,
47301 PETALING JAYA
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
P +6 03 7832 3591
F +6 03 78323921
info@medi-asia.com
www.medi-asia.com

medi Middle East
P. O. Box: 109307
Abu Dhabi
United Arab Emirates
P +971 2 6429201
F +971 2 6429070
info@mediuae.ae
www.mediuae.ae

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
P +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Norway AS
P.B. 238
4291 Kopervik
Norway
P +004752 84 45 00
F +004752 84 45 09
E-Mail: post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z. o. o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
P +48 32 230 60 21
F +48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi RUS LRC
Business Park "Rumyantsevo"
Rumyantsevo, Build. 1
Leninsky Township
142784 Moscow
Russia
P +7 495 229 04 58
F +7 495 229 04 58
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Sweden AB
Box 6034, SE-192 06 Sollentuna
Sweden
P +00468 96 97 98
F +00468 626 68 70
E-Mail: info@medi.se
www.medi.se

medi Bayreuth Unipessoal,
Lda Rua Eugenio de Castro
Rodrigues, nº 2
1700-184 Lisboa
Portugal
P +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
P +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center „Flora Park“
Kiev 04112
Ukraine
P +380 44 591 1163
F +380 44 455 6181
info@medi.ua
www.medi.ua

medi USA L.P.
6481. Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
P +1 336 4 49 44 40
F +1 888 5 70 45 54
orders@mediusa.com
www.mediusa.com

Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth
Germany
P +49 921 912-0
F +49 921 912-783
export@medi.de
www.medi.de/en

MAXIS a.s., medi group company
Na Potůčkách 163
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
T +420 571 616 819
info@medi-expert.cz
www.medi-expert.cz



4 0 49772 1 769445

99CZ25 / 12.2015